

♥ticare

# i n H E X

GAP **ZERO**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY  
ticare



♥ MOVING FOR CARE

# inHEX

EL IMPLANTE LIBRE DE FILTRACIÓN BACTERIANA

**GAP ZERO**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY  
ticare

CONEXIÓN CÓNICA INTERNA  
con gapZero

## HOMBRO MAQUINADO

para platform switching  
y una estética máxima

## ESPIRA DOBLE ROSCA

que reduce a la mitad  
el tiempo de inserción  
y el calentamiento óseo

## FORMA ANATÓMICA

para una alta estabilidad  
primaria y facilidad de  
inserción

## MICROESPIRAS

para un mejor comportamiento  
biomecánico

## SUPERFICIE RBM-TC

para un mayor contacto  
hueso-implante

## ÁPICE MÁS EFICAZ

gracias a un cono más apuntado  
que aporta estabilidad primaria  
adicional

IMPLANTE  
CORTO  
inHEX

LA GRAN SOLUCIÓN



**EXCELENTE  
MANTENIMIENTO**  
del nivel de hueso marginal

El único sistema con evidencia científica de **gapZero**

# inHEX

## quattro

MÁS SOLUCIONES PARA EL HUESO BLANDO

**GAP ZERO**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY  
ticare

CONEXIÓN CÓNICA INTERNA  
con gapZero

### ESTABILIDAD PRIMARIA

Especialmente diseñado  
para hueso III y IV


### MAYOR PROGRESIVIDAD

en el torque de inserción

Diseño de rosca que ofrece  
máxima estabilidad en  
**HUESO POCO DENSO**

### FORMA PLANA

para geometría de  
corte eficaz

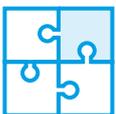

**MEJOR  
COMPORTAMIENTO  
EN POST EXTRACCIÓN**

### PREDICTIBILIDAD

El implante libre de filtración bacteriana con resultados probados clínica y científicamente

# PerioHYBRID

EL IMPLANTE PARA EL PACIENTE DE RIESGO

**GAP ZERO**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY  
ticare

CONEXIÓN CÓNICA INTERNA  
con gapZero

1,5 mm de *ultrabaja* rugosidad  
(0,18  $\mu\text{m}$ )

Rugosidad moderada  
(1,43  $\mu\text{m}$ )

## CON IMPORTANTES BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

- ♥ Cero remodelación ósea
- ♥ Mejor predictibilidad ante situaciones adversas

## INDICACIONES DE TICARE PERIO HYBRID

Pacientes susceptibles de perder hueso

- ♥ Historia de periodontitis o periimplantitis
- ♥ Falta de regularidad en terapia de mantenimiento
- ♥ Fumadores
- ♥ Fenotipo fino de hueso
- ♥ Mínima presencia de mucosa queratinizada

Perio  
**HYBRID**

Perio  
**HYBRID**  
quattro

Misma geometría y conexión que **ticare inhex** y **ticare inhex quattro**, con los que comparten todos los aditamentos.

Disponibles en las plataformas MINI, STD, MAXI en todas las medidas.

# PerioHYBRID

BASÁNDOSE EN ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y CLÍNICOS

La literatura científica evidencia beneficios del implante híbrido en pacientes periodontales en caso de padecer periimplantitis

Mayor predictibilidad



Progresión más lenta



Mejor tratamiento



  
ticare

ESTUDIOS SOBRE HÍBRIDOS  
CON IMPLANTES TICARE

- ♥ Durante el primer año de carga, los cambios óseos marginales fueron despreciables 0,01 mm, sin que se detectaran diferencias significativas entre los implantes híbridos y rugosos. <sup>(1)</sup>
- ♥ En individuos propensos a desarrollar periimplantitis o un perfil bacteriano patógeno los implantes Híbridos con una zona coronal maquinada podrían ofrecer beneficios en términos de perfil inflamatorio reducido para la prevención y detención de la periimplantitis. <sup>(2)</sup>



Perio  
**HYBRID**  
quattro

(1) One year outcomes of dental implants with a hybrid surface macro-design placed in patients with history of periodontitis: A randomized clinical trial.

Mariano Sanz, Benjamín Serrano, Ignacio Sanz Sánchez, Katherine Serrano, Eduardo Montero.  
Journal of Clinical Periodontology, 2021.

(2) Microbial and host-derived biomarker changes during ligature-induced and spontaneous peri-implantitis in the beagle dog.

Alberto Monje, Sigrun Eick, Daniel Buser, Giovanni Salvi  
Journal of Periodontal Research, 2020.

# GAP ZERO<sup>®</sup>

TECNOLOGÍA  
ticare

LA TECNOLOGÍA QUE DISMINUYE EL RIESGO DE PERIIMPLANTITIS

El único sistema con  
evidencia científica de  
**gapZero**

**EXCELENTE  
MANTENIMIENTO**  
del nivel de hueso marginal

**ticare**  
MOVING FOR CARE

Ajuste perfecto  
a 20 y 30 Ncm

**GAP 0**


**EL IMPLANTE LIBRE DE  
FILTRACIÓN BACTERIANA**




**ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS**  
con Ticare acreditan el gapZero y sus beneficios clínicos.

# C A S O   C L Í N I C O

Implantes **Ticare Perio Hybrid** colocados inmediatamente en alveolo postextracción con regeneración simultánea utilizando aloinjerto y membrana reabsorbible. Reentrada a los 4 meses donde se aprecia aumento significativo del contorno. Control clínico y radiográfico a los 12 meses donde se denota salud periimplatar y estabilidad del nivel óseo.

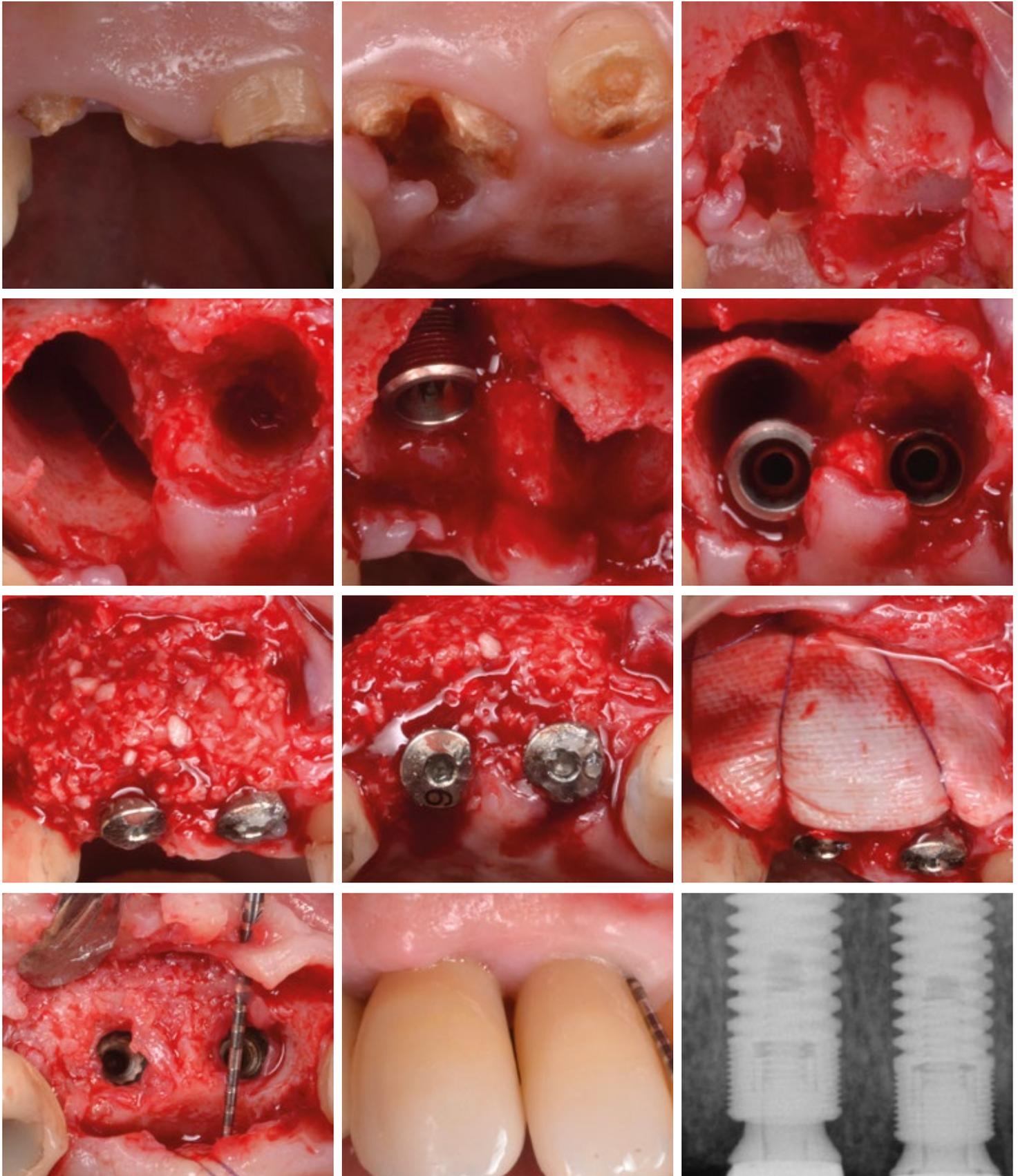

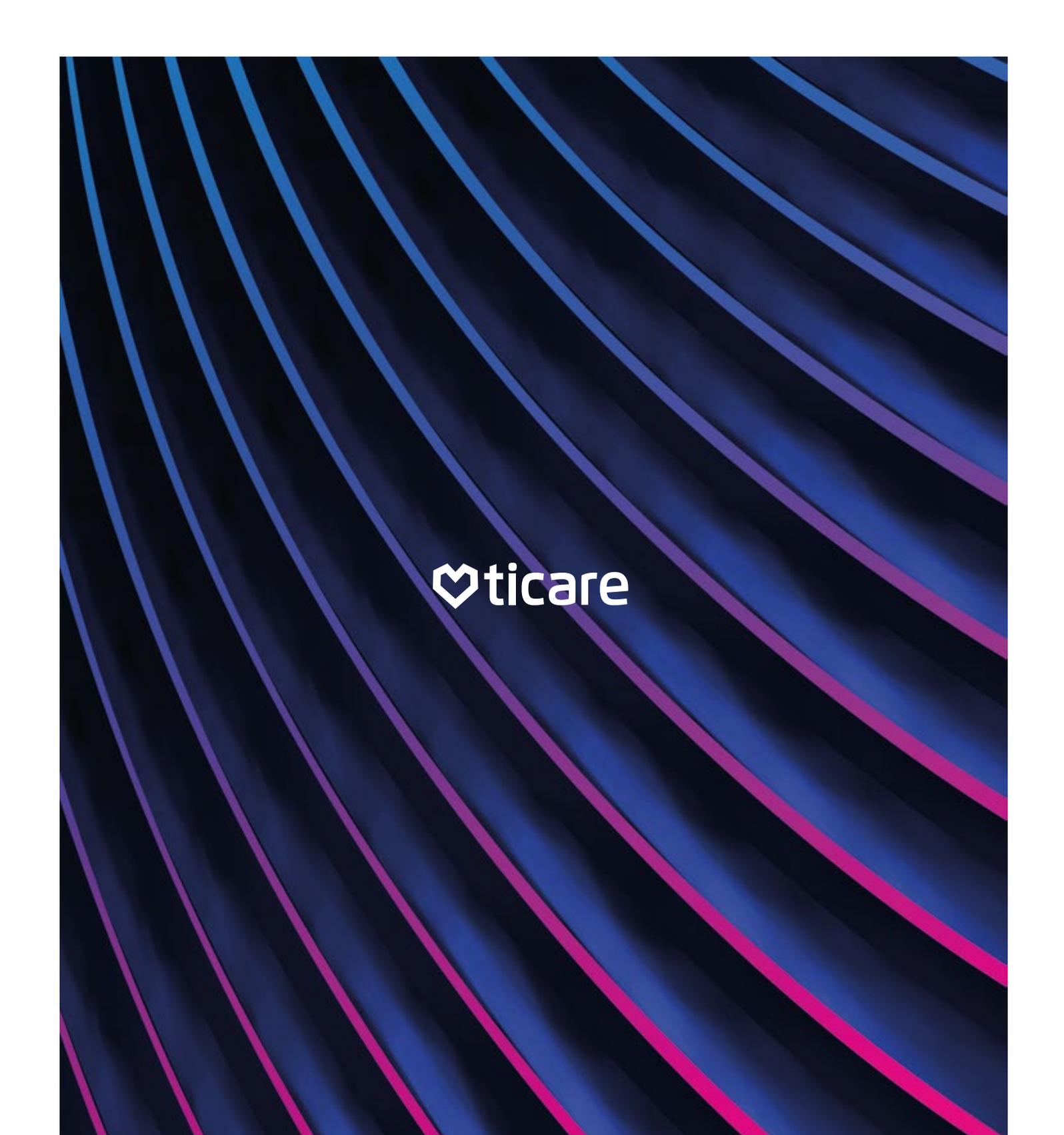

♥ticare

♥ MOVING FOR CARE