




in H E X



GAP **ZERO**[®]
TECHNOLOGY
ticare

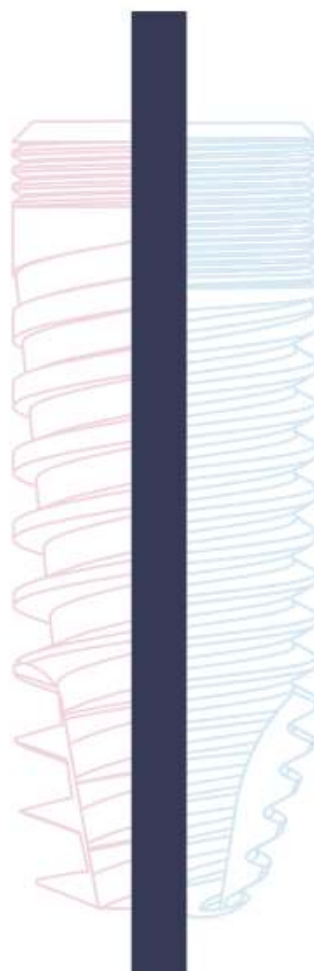

Nuestra historia

Ticare nace como evolución de Mozo Grau, compañía fundada en Valladolid (España) en 1996. Desde nuestros inicios, hemos trabajado con un propósito claro: investigar, diseñar y desarrollar soluciones fiables para la implantología dental, combinando evidencia científica, innovación y experiencia.

La búsqueda de la excelencia forma parte de nuestro trabajo diario. Analizamos cada variable que interviene en el desarrollo de nuestros productos y trasladamos el conocimiento científico a soluciones precisas, fiables y adaptadas a las necesidades de la práctica clínica.

La cualificación y el compromiso de nuestro equipo, junto con la colaboración de profesionales, universidades, sociedades científicas y grupos de investigación, nos permiten seguir evolucionando y afrontar los nuevos retos de la salud periimplantaria.

Tecnología y precisión

La tecnología y la precisión son dos de los pilares de Ticare. Contamos con equipamiento de última generación y procesos de fabricación capaces de alcanzar precisiones de hasta 0,001mm.

Esta capacidad tecnológica, unida a rigurosos sistemas de control, nos permite fabricar componentes con tolerancias extremadamente exigentes y garantizar la precisión y fiabilidad de cada pieza. A ello se suma GapZero®, tecnología exclusiva de Ticare, que permite alcanzar un ajuste preciso entre implante y prótesis.

Invertimos de forma continua en tecnología, procesos y conocimiento para seguir avanzando y ofrecer soluciones que respondan a las exigencias de los profesionales y de la implantología actual.



Nuestros clientes

En Ticare creemos que escuchar al profesional es esencial para seguir evolucionando. Por ello, mantenemos una relación cercana con nuestros clientes y colaboramos activamente con profesionales y referentes de la implantología oral.

Nuestra participación en congresos y encuentros científicos, junto con la organización de cursos y actividades formativas, nos permite compartir conocimiento, conocer de primera mano las necesidades del sector e incorporar esa experiencia al desarrollo y mejora continua de nuestras soluciones implanto protésicas.

Esta cercanía, unida a nuestra experiencia y capacidad tecnológica, nos permite ofrecer soporte y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada paciente y mercado, manteniendo siempre el servicio, la seriedad y el rigor que caracterizan a Ticare.

I+D+i Colaboración científica

La investigación y la innovación forman parte de nuestra manera de entender la implantología. En Ticare apostamos por generar conocimiento que nos permita desarrollar nuevos productos, mejorar los existentes y avanzar en sus técnicas de aplicación.

Por ello, colaboramos con universidades, grupos de investigación, sociedades científicas y profesionales especializados, creando vínculos que acercan la investigación a la práctica clínica.

Nuestro compromiso va más allá del desarrollo de producto: apoyamos proyectos científicos y actividades de formación que contribuyen al crecimiento de los profesionales, al avance de la implantología dental y a mejorar la salud periimplantaria de los pacientes.



La calidad, fundamento de Ticare: Certificaciones



ISO 13485: 2016



MARCAO CE



US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

Características del envase



El etiquetado de producto

Utilizable hasta la fecha	Un solo uso, no reutilizar
Fabricante	Fecha fabricación
No utilizar si el envase está dañado	Marcado CE
Precaución	Dispositivo médico
Esterilizado por rayos Gamma. Barrera estéril.	No reesterilizar
Instrucciones de uso	Código UDI
Referencia	Lote
Número de modelo	

ticare Implante dental		
DESCRIPCIÓN REF REFERENCIA LOT LOTE FECHA FABRICACIÓN FECHA CADUCIDAD # MODELO MOZO GRAU S.A. Santiago López González 7, 47197 VALLADOLID, SPAIN Tel. +34 983 309 602 ID NUMBER 123456789 CE 0051 UDI CÓDIGO UDI (01)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DESCRIPCIÓN REF REFERENCIA LOT LOTE # MODELO ID NUMBER 123456789 Implante dental	DESCRIPCIÓN REF REFERENCIA LOT LOTE # MODELO ID NUMBER 123456789 Implante dental	DESCRIPCIÓN REF REFERENCIA LOT LOTE # MODELO ID NUMBER 123456789 Implante dental

	Presentación	3
	Calidad	4
	Características de envase y etiquetado de producto	5
	Índice	6
	gapZero®	7
IMPLANTES	Sistema de implantes Inhex TrC	8
	Implante Inhex V2 TrC MINI 3,30	10
	Implante Inhex V2 TrC STD 3,75	10
	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25	11
	Implante Inhex V2 TrC Maxi 5,00	11
	Implante Inhex Quattro TrC MINI 3,30	15
	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75	15
	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25	15
	Protocolo de fresado crestal	16
	Sistema de implantes Inhex híbrido	18
	Implante Inhex V2 híbrido MINI 3,30	19
	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75	19
	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25	20
	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5,00	20
	Implante Inhex Quattro híbrido MINI 3,30	21
	Implante Inhex Quattro híbrido STD 3,75	21
	Implante Inhex Quattro híbrido STD 4,25	21
	Llaves dinamométricas y destornilladores	22
	BioCam	24
	Scanbodies Ticare	25
	Correcciones de angulación	26
	Scanbodies de otras conexiones	27
	Tornillos BioCam y correspondencias	28
	Sistema de Prótesis Inhex	31
	Árboles de prótesis	32
	Aditamentos protésicos Inhex	40
	Aditamentos temporales/carga inmediata Inhex	58
	Tornillos para pilares y postes Inhex	60
	Compact Surgical Box y Bandejas	63
	Fresas para implantes	65
	Instrumental quirúrgico	70
	Flujo digital. Cirugía Guiada Fidelis	73
	Anexos	77

GAP ZERO[®]

TECHNOLOGY

ticare

LA TECNOLOGÍA QUE DISMINUYE EL RIESGO DE PERIIMPLANTITIS

El único sistema con
evidencia científica de
gapZero[®]

**EXCELENTE
MANTENIMIENTO**
del nivel de hueso marginal

Ajuste perfecto
a 20 y 30 Ncm

GAP 0

**ticare**
MOVING FOR CARE

**EL IMPLANTE LIBRE DE
FILTRACIÓN BACTERIANA**



ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS
con Ticare acreditan el gapZero[®] y sus beneficios clínicos.




GAP ZERO
TECHNOLOGY
ticare

Implantes Inhex® TrC

in HEX
V₂ TrC

in HEX
quattro
TrC

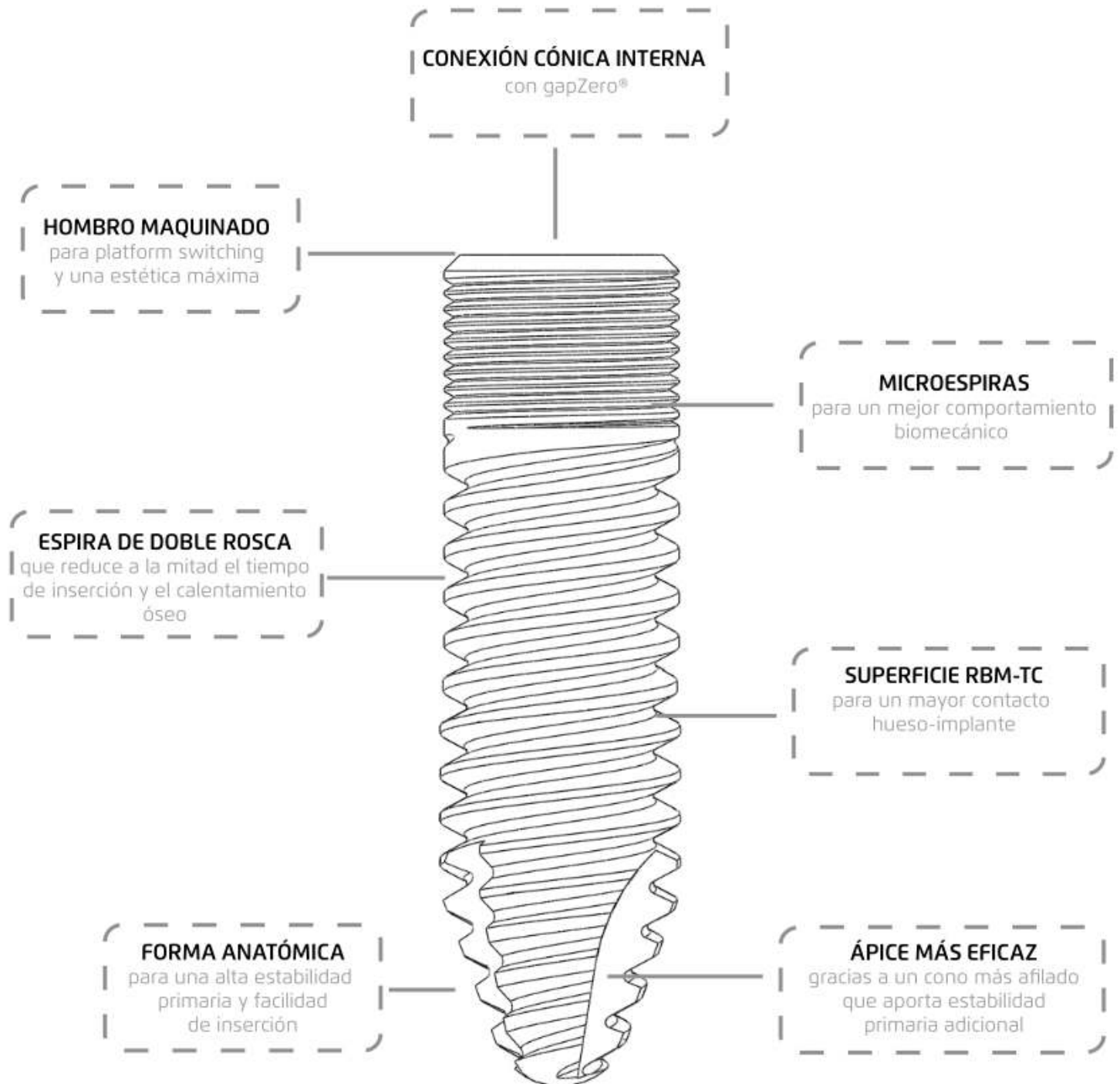

GAP ZERO
TECHNOLOGY
ticare

i n H E X
V₂ TrC


Inhex V2 TrC 3,3 mm MINI



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/245 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23403310	Implante Inhex V2 TrC MINI 3,3 x 10 mm ONE
23403311	Implante Inhex V2 TrC MINI 3,3 x 11,5 mm ONE
23403313	Implante Inhex V2 TrC MINI 3,3 x 13 mm ONE
23403315	Implante Inhex V2 TrC MINI 3,3 x 15 mm ONE
23203325	Tornillo de cierre Inhex Mini

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante

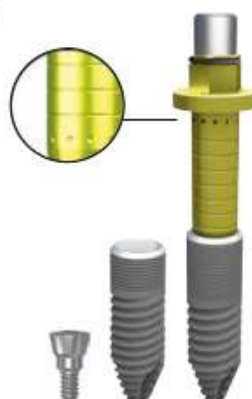

Inhex V2 TrC

- Material Titanio grado V
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 3,3 mm
- Plataforma del implante: 2,3 mm
- Rosca Interna 1,4 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador largo
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color amarillo

Recomendaciones:

- Zonas anteriores (incisivos laterales superiores e incisivos inferiores)
- Zonas de carga reducida
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 TrC 3,75 mm STD



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/245 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23403708	Implante Inhex V2 TrC STD 3,75 x 8 mm ONE
23403710	Implante Inhex V2 TrC STD 3,75 x 10 mm ONE
23403711	Implante Inhex V2 TrC STD 3,75 x 11,5 mm ONE
23403713	Implante Inhex V2 TrC STD 3,75 x 13 mm ONE
23403715	Implante InhexV2 TrC STD 3,75 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 TrC

- Material Titanio c.p. de grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 3,75 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color azul

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 TrC 4,25 mm STD



REF.	DESCRIPCIÓN
23404206	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 6 mm ONE
23404208	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 8 mm ONE
23404210	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 10 mm ONE
23404211	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 11,5 mm ONE
23404213	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 13 mm ONE
23404215	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 TrC

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 4,25 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color lila

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 TrC

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 5 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color turquesa
- Conexión STD - Utilizar componentes de plataforma STD

Recomendaciones:

- Para sector posterior con poca disponibilidad ósea siempre que exista suficiente espacio
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 TrC 5 mm STD



REF.	DESCRIPCIÓN
23405406	Implante Inhex V2 TrC STD 5 x 6 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 TrC 5 mm MAXI



REF.	DESCRIPCIÓN
23405009	Implante Inhex V2 TrC MAXI 5 x 9 mm ONE
23405010	Implante Inhex V2 TrC MAXI 5 x 10 mm ONE
23405011	Implante Inhex V2 TrC MAXI 5 x 11,5 mm ONE
23405013	Implante Inhex V2 TrC MAXI 5 x 13 mm ONE
23405015	Implante Inhex V2 TrC MAXI 5 x 15 mm ONE
23205000	Tornillo de cierre Inhex MAXI

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 TrC

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 5 mm
- Plataforma del implante 3,8 mm
- Rosca Interna 2,0 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color turquesa

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca siempre que exista suficiente espacio
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

inHEX V2TrC

EL IMPLANTE LIBRE DE FILTRACIÓN BACTERIANA

GAP **ZERO**[®]
TECHNOLOGY
ticare

HOMBRO MAQUINADO

para platform switching
y una estética máxima

MICROESPIRAS

para un mejor comportamiento
biomecánico

ESPIRA DOBLE ROSCA

que reduce a la mitad
el tiempo de inserción
y el calentamiento óseo

SUPERFICIE RBM-TC

para un mayor contacto
hueso-implante

FORMA ANATÓMICA

para una alta estabilidad
primaria y facilidad de
inserción

ÁPICE MÁS EFICAZ

gracias a un cono más apuntado
que aporta estabilidad primaria
adicional




IMPLANTE
CORTO
inHEX

LA GRAN SOLUCIÓN



**EXCELENTE
MANTENIMIENTO**
del nivel de hueso marginal

El único sistema con evidencia científica de **gapZero**[®]

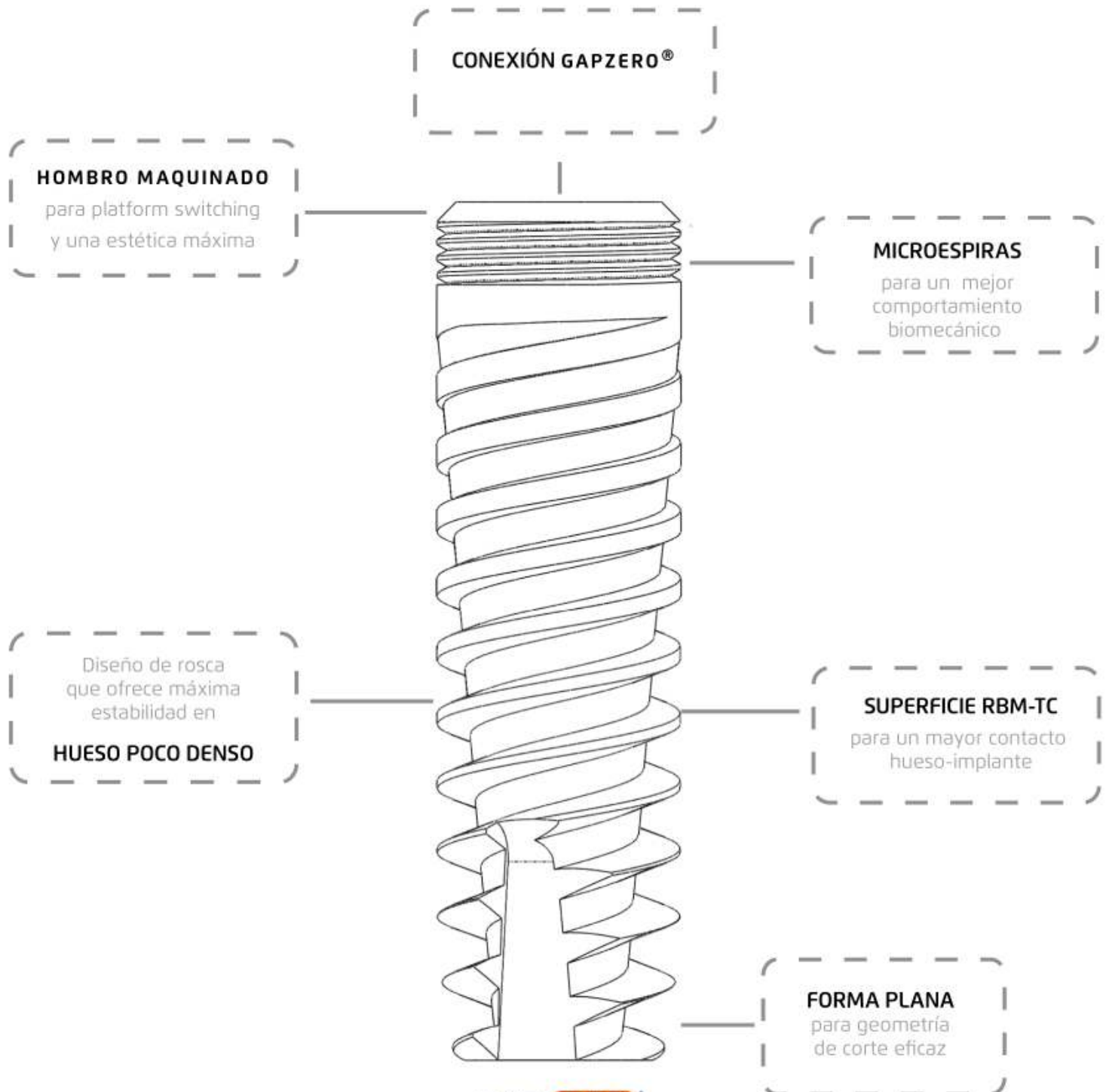

GAP ZERO
TECHNOLOGY
ticare

in HEX
quattro

TrC

MÁS SOLUCIONES PARA EL HUESO BLANDO

GAP ZERO[®]
TECHNOLOGY
ticare

ESTABILIDAD PRIMARIA

Especialmente diseñado
para hueso III y IV

MAYOR PROGRESIVIDAD

en el torque de inserción

Diseño de rosca que ofrece
máxima estabilidad en
HUESO POCO DENSO

FORMA PLANA

para geometría de
corte eficaz



**MEJOR
COMPORTAMIENTO
EN POST EXTRACCIÓN**

PREDICTIBILIDAD

El implante libre de filtración bacteriana con resultados probados clínica y científicamente

Inhex Quattro TrC 3,3 mm MINI



Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25403310	Implante Inhex Quattro TrC MINI 3,3 x 10 mm ONE
25403311	Implante Inhex Quattro TrC MINI 3,3 x 11,5 mm ONE
25403313	Implante Inhex Quattro TrC MINI 3,3 x 13 mm ONE
25403315	Implante Inhex Quattro TrC MINI 3,3 x 15 mm ONE
23203325	Tornillo de cierre Inhex MINI

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex Quattro TrC

- Material Titanio grado V
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 3,3 mm
- Plataforma del implante 2,3 mm
- Rosca interna 1,4 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador largo
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color amarillo

Recomendaciones:

- Incisivos laterales superiores
- Zonas de carga reducida
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex Quattro TrC 3,75 mm STD



Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25403708	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75 x 8 mm ONE
25403710	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75 x 10 mm ONE
25403711	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75 x 11,5 mm ONE
25403713	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75 x 13 mm ONE
25403715	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex Quattro TrC

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 3,75 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color azul

Recomendaciones:

- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex Quattro TrC 4,25 mm STD



Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25404208	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25 x 8 mm ONE
25404210	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25 x 10 mm ONE
25404211	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25 x 11,5 mm ONE
25404213	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25 x 13 mm ONE
25404215	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex Quattro TrC

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 4,25 mm
- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color lila


Recomendaciones:

- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm



Aplicación
secuencia fresado

SECUENCIA ESTÁNDAR

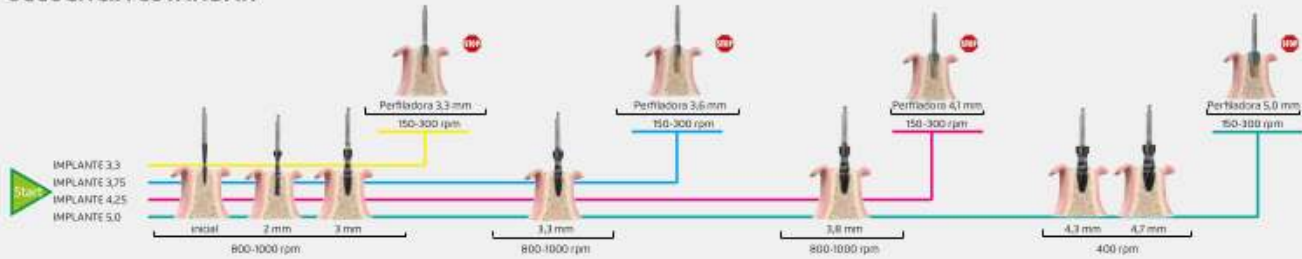


SECUENCIA HUESOS DUROS



No utilizar la fresa perfiladora en implantes de 6 mm de longitud



SECUENCIA ESTÁNDAR HUESOS TIPO III Y IV

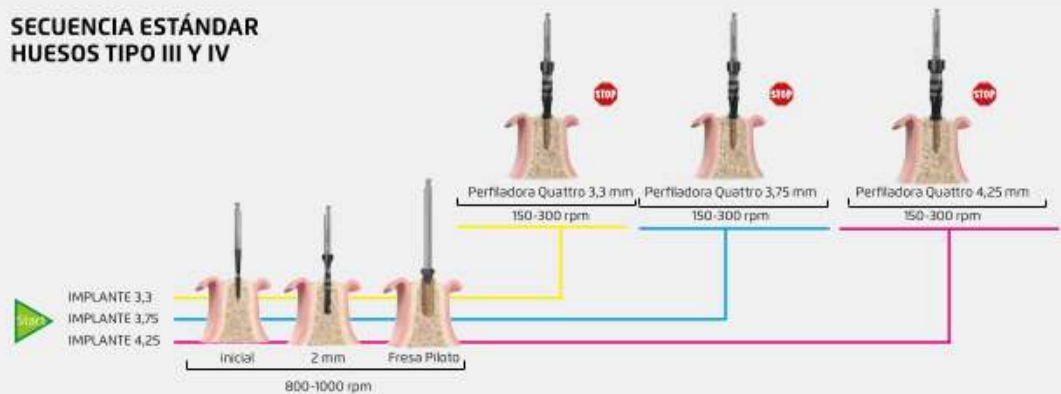

Solo para huesos tipo III y IV la perfiladora Quattro debe introducirse a un máximo de 2 mm de profundidad

SECUENCIA HUESOS TIPO II



Implantes Quattro no recomendados para huesos tipo I

inHEX

V₂PerioHYBRID

EL IMPLANTE PARA EL PACIENTE DE RIESGO

GAP **ZERO**[®]
TECHNOLOGY
ticare

CONEXIÓN CÓNICA INTERNA
con gapZero

1,5 mm de ultrabaja rugosidad
(0,18 μm)

Rugosidad moderada
(1,43 μm)

CON IMPORTANTES BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

- ♥ Cero remodelación ósea
- ♥ Mejor predictibilidad ante situaciones adversas

INDICACIONES DE TICARE PERIO HYBRID

Pacientes susceptibles de perder hueso

- ♥ Historia de periodontitis o periimplantitis
- ♥ Falta de regularidad en terapia de mantenimiento
- ♥ Fumadores
- ♥ Fenotipo fino de hueso
- ♥ Mínima presencia de mucosa queratinizada



inHEX
V₂Perio
HYBRID

Misma geometría y conexión que **ticare inhex** y **ticare inhex quattro**,
con los que comparten todos los aditamentos.

Disponibles en las plataformas MINI, STD, MAXI en todas las medidas.

inHEX
quattro
Perio
HYBRID





GAP **ZERO**[®]
TECHNOLOGY
ticare

Implantes Inhex[®] híbrido

inHEX
V₂ Perio
HYBRID

inHEX
quattro
Perio
HYBRID


Inhex V2 híbrido 3,3 mm MINI



Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23623310	Implante Inhex V2 híbrido MINI 3,3 x 10 mm ONE
23623311	Implante Inhex V2 híbrido MINI 3,3 x 11,5 mm ONE
23623313	Implante Inhex V2 híbrido MINI 3,3 x 13 mm ONE
23623315	Implante Inhex V2 híbrido MINI 3,3 x 15 mm ONE
23203325	Tornillo de cierre Inhex MINI

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante

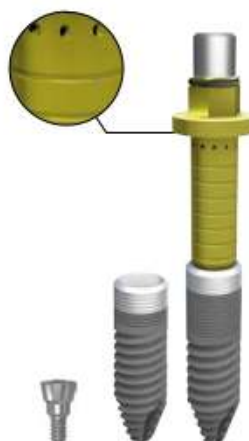

Inhex V2 híbrido

- Material Titanio grado V
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 3,3 mm
- Plataforma del implante: 2,3 mm
- Rosca interna 1,4 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador largo
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color amarillo

Recomendaciones:

- Zonas anteriores (incisivos laterales superiores e incisivos inferiores)
- Zonas de carga reducida
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm


Inhex V2 híbrido 3,75 mm STD



Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23623708	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75 x 8 mm ONE
23623710	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75 x 10 mm ONE
23623711	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75 x 11,5 mm ONE
23623713	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75 x 13 mm ONE
23623715	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante

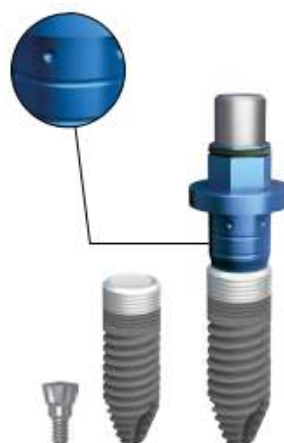

Inhex V2 híbrido

- Material Titanio grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 3,75 mm
- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Rosca interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color azul

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm



Inhex V2 híbrido 4,25 mm STD



Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF. DESCRIPCIÓN

23624206	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 6 mm ONE
23624208	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 8 mm ONE
23624210	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 10 mm ONE
23624211	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 11,5 mm ONE
23624213	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 13 mm ONE
23624215	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 híbrido

- Material Titanio grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 4,25 mm
- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Rosca interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color púrpura

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 híbrido 5 mm STD



Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF. DESCRIPCIÓN

23625406	Implante Inhex V2 híbrido STD 5 x 6 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 híbrido

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 5 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color turquesa
- Conexión STD - Utilizar componentes de plataforma STD

Recomendaciones:

- Para sector posterior con poca disponibilidad ósea siempre que exista suficiente espacio
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 híbrido 5 mm MAXI



Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF. DESCRIPCIÓN

23625009	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5 x 9 mm ONE
23625010	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5 x 10 mm ONE
23625011	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5 x 11,5 mm ONE
23625013	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5 x 13 mm ONE
23625015	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5 x 15 mm ONE
23205000	Tornillo de cierre Inhex MAXI

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 híbrido

- Material Titanio grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 5 mm
- Plataforma del implante: 3,8 mm
- Rosca interna 2,0 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color turquesa

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca siempre que exista suficiente espacio
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex Quattro híbrido 3,3 mm MINI



Compliance according to Regulation 0051 (E.U.) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25623310	Implante Inh Quattro híbrido MINI 3,3 x 10 mm ONE
25623311	Implante Inh Quattro híbrido MINI 3,3 x 11,5 mm ONE
25623313	Implante Inh Quattro híbrido MINI 3,3 x 13 mm ONE
25623315	Implante Inh Quattro híbrido MINI 3,3 x 15 mm ONE
23203325	Tornillo de cierre Inhex MINI

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex Quattro híbrido 3,75 mm STD



Compliance according to Regulation 0051 (E.U.) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25623708	Implante Inh Quattro híbrido STD 3,75 x 8 mm ONE
25623710	Implante Inh Quattro híbrido STD 3,75 x 10 mm ONE
25623711	Implante Inh Quattro híbrido STD 3,75 x 11,5 mm ONE
25623713	Implante Inh Quattro híbrido STD 3,75 x 13 mm ONE
25623715	Implante Inh Quattro híbrido STD 3,75 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex Quattro híbrido 4,25 mm STD



Compliance according to Regulation 0051 (E.U.) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25624208	Implante Inh Quattro híbrido STD 4,25 x 8 mm ONE
25624210	Implante Inh Quattro híbrido STD 4,25 x 10 mm ONE
25624211	Implante Inh Quattro híbrido STD 4,25 x 11,5 mm ONE
25624213	Implante Inh Quattro híbrido STD 4,25 x 13 mm ONE
25624215	Implante Inh Quattro híbrido STD 4,25 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD



Inhex Quattro híbrido

- Material Titanio grado V
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 3,3 mm
- Plataforma del implante 2,3 mm
- Rosca interna 1,4 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador largo
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color amarillo

Recomendaciones:

- Incisivos laterales superiores
- Zonas de carga reducida
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex Quattro híbrido

- Material Titanio grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 3,75 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color azul

Recomendaciones:

- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex Quattro híbrido

- Material Titanio grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 4,25 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color púrpura

Recomendaciones:

- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm



Llaves dinamométricas y destornilladores

♥ticare
INSTRUMENTAL
QUIRURGICO

Llaves dinamométricas

REF. DESCRIPCIÓN

14658040 Llave dinamométrica
Torque ajustable entre 10 y 40 Ncm



Destornilladores de cirugía



Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF. DESCRIPCIÓN

15251125 Destornillador carraca 7 mm. dia. hex. 1,25 l. 9 mm



15252125 Destornillador carraca 7 mm. dia. hex. 1,25 l. 14 mm



15252525 Destornillador carraca 7 mm. dia. hex. 1,25 l. 25 mm



15253125 Destornillador carraca 7 mm. dia. plano l. 14 mm



Destornilladores de prótesis



Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF. DESCRIPCIÓN

15261125 Destornillador torque hexagonal carraca corto l. 9 mm



15262125 Destornillador torque hexagonal carraca largo l. 14 mm



Puntas



Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF. DESCRIPCIÓN

13801525 Destornillador para c/a hex. corto 1,25 l. 9 mm



13802525 Destornillador para c/a hex. largo 1,25 l. 14 mm



13803125 Destornillador para c/a plano l. 14 mm



13861125 Destornillador torque para c/a hex. l. 9 mm



13862125 Destornillador torque para c/a hex. l. 14 mm



19008393 Locator® herramienta Core Tool



Mango



Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF. DESCRIPCIÓN

21000600 Mango destornillador extraoral



LLAVES DINAMOMÉTRICAS

- Las llaves dinamométricas aseguran que los tornillos de prótesis estén apretados con precisión al torque recomendado
- Gran comodidad de trabajo en la zona posterior
- Producto de distribución

DESTORNILLADORES DE CIRUGÍA

- Utilizar el destornillador hexagonal 1,25 mm para los tornillos de cierre y de cicatrización y para todos los tornillos de prótesis, a excepción de cuando se usen tornillos de ranura y correcciones de angulación con BioCam.

DESTORNILLADORES DE PRÓTESIS

- La superficie de contacto dentro del hexágono del tornillo es máxima.
- Recomendado para el torque final de restauraciones.

PUNTAS

- Utilizar las puntas de contra-ángulo junto con el contra-ángulo convencional con control de torque.
- Opción con multiconversor Ref:18089021
- Utilizar la Locator® Core Tool para colocar y retirar pilares Over-Loc y elementos retentivos Locator®. El Locator® Core Tool es un producto de distribución.


MANGO

- Utilizar con los destornilladores con conexión C/A
- Utilizar en situaciones comprometidas, en posteriores con difícil acceso (toma de impresiones)
- No recomendado para la inserción del implante

♥ticare FlujoDIGITAL

CERRANDO EL CÍRCULO PARA UN AJUSTE PERFECTO

ESCANEADO INTRAORAL

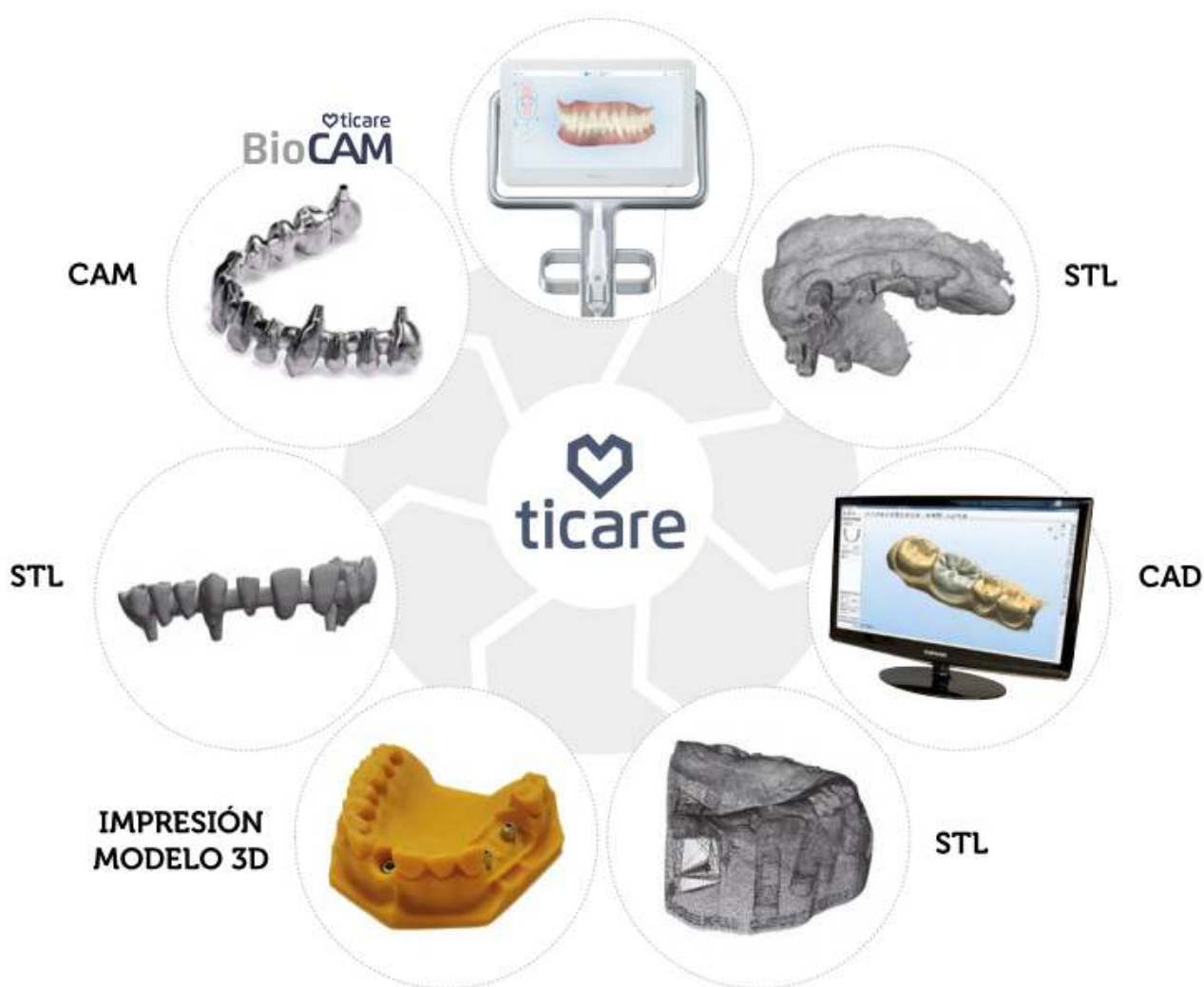

SCANBODIES Y ANÁLOGOS DIGITALES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON SU DELEGADO COMERCIAL

♥ticare
BioCAM

Sistema de scanbodies Ticare BioCAM

Los scanbodies BioCAM han sido desarrollados por nuestro departamento de ingeniería e I+D y testados con la última generación de metrología tridimensional. Diseñados y fabricados para facilitar el escaneo, los scanbodies BioCAM están concebidos para una óptima precisión, tanto para uso con escáner intraoral como con escáner de sobremesa, mejorando el posicionamiento tridimensional del plano de trabajo en ambas situaciones. Este conjunto asegura una precisión de escaneo de 0,01 mm.



Scanbodies directos a implante Ticare BioCAM

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø
41236001	Scanbody Inhex MINI directo c/t (TC 10)	3,4 mm
41236002	Scanbody Inhex STD directo c/t (TC 11)	4,1 mm
41236003	Scanbody Inhex MAXI directo c/t (TC 12)	4,1 mm
41636001	Scanbody Inhex MINI directo c/t TCP (TC 10)	3,4 mm
41636002	Scanbody Inhex STD directo c/t TCP (TC 11)	4,1 mm
41636003	Scanbody Inhex MAXI directo c/t TCP (TC 12)	4,1 mm

TCP



Scanbodies no directos a implante Ticare BioCAM

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø
41146000	Scanbody Inhex/Osseous MINI pilar cónico 10° (TC 2)	3,4 mm
41146004	Scanbody no rot. Inhex STD/MAXI-Osseous STD pilar cónico 10° (TC 4)	4,1 mm
41146005	Scanbody Inhex STD/MAXI-Osseous STD pilar cónico 30° (TC 5)	4,1 mm
41146006	Scanbody Inhex STD/MAXI-Osseous STD pilar multiunit (TC 6)	4,8 mm



Análogos directos a implante


REF.	DESCRIPCIÓN	Ø
41235541	Análogo digital Inhex MINI	3,3 mm
41235501	Análogo digital Inhex STD	4,1 mm
41235605	Análogo digital Inhex MAXI	5,0 mm



Análogos no directos a implante

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø
41005541	Análogo digital Inhex/Osseous MINI pilar cónico 10°	3,4 mm
41005511	Análogo digital Inhex STD/MAXI-Osseous STD pilar cónico 10°	4,1 mm
41003511	Análogo digital Inhex STD/MAXI-Osseous STD pilar cónico 30°	4,1 mm
41145117	Análogo digital pilar multiunit Inhex STD/MAXI-Osseous STD	4,8 mm

SCANBODIES TICARE BIOCAM

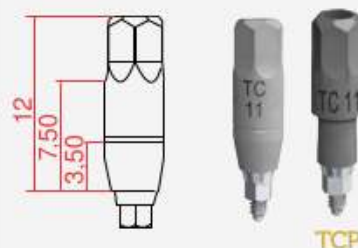

- Material: Titanio grado IV
- Scanbodies de una pieza para uso con escáner intraoral y de sobremesa (Dispone de un tornillo prisionero desmontable después de cada uso para su correcta higiene y mantenimiento)
- Los scanbodies se atornillan con el destornillador hexagonal 1,25 mm a un torque de 3 Ncm.
- Scanbodies esterilizables

ANÁLOGOS DIGITALES TICARE



- Diseño en dos piezas roscadas y amplia superficie de posicionamiento axial, radial y angular para una fácil y precisa colocación en el modelo 3D
- Material: Acero inoxidable



BioCAM

Sólo un ajuste perfecto
cuenta con **gapZero®**



- ♥ Prótesis personalizada mecanizada en el centro de fresado Ticare BioCAM para mayor calidad y menor aflojamiento de tornillo.
- ♥ Mecanizado especialmente preciso en las conexiones para un ajuste con gapZero libre de filtración bacteriana.

Corrección de angulación para prótesis atornillada Ticare BioCAM

InHex MINI	0° a 15°
InHex STD	0° a 20°
InHex MAXI	0° a 20°
Pilar Multiunit	0° a 30°
Pilar Cónico 10°	0° a 30°
Pilar Cónico 30°	0° a 30°



CORRECCIÓN DE ANGULACIÓN

- Ticare BioCam ofrece la opción de corregir la angulación del orificio de acceso al tornillo en situaciones estéticamente comprometidas.



Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

Scanbodies directos a implante otras conexiones

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø
42028035	Scanbody compatible TCZ1 Zimmer® 3,5	3,5 mm
42028045	Scanbody compatible TCZ2 Zimmer® 4,5	4,6 mm
42028057	Scanbody compatible TCZ3 Zimmer® 5,7	5,8 mm
42018035	Scanbody compatible TCS1 Straumann® NNC 3,5	3,4 mm
42018048	Scanbody compatible TCS2 Straumann® Tissue Level RN 4,8	4,1 mm
42018065	Scanbody compatible TCS3 Straumann® Tissue level WN 6,5	5 mm
42018033	Scanbody compatible TCS4 Straumann® Bone level NC	3,4 mm
42018041	Scanbody compatible TCS5 Straumann® Bone level RC	4,1 mm
42038035	Scanbody compatible TCR1 Nobel Replace® 3,5	3,5 mm
42038043	Scanbody compatible TCR2 Nobel Replace® 4,3	4,1 mm
42038050	Scanbody compatible TCR3 Nobel Replace® 5,0	5 mm
42038060	Scanbody compatible TCR4 Nobel Replace® 6,0	5,8 mm
42058034	Scanbody compatible TCC1 3i Certain® 3,4	3,4 mm
42058041	Scanbody compatible TCC2 3i Certain® 4,1	4,1 mm
42058050	Scanbody compatible TCC3 3i Certain® 5,0	4,1 mm
42058060	Scanbody compatible TCC4 3i Certain® 6,0	4,1 mm
42039030	Scanbody compatible TCNA1 Nobel Active® 3,0	3,4 mm
42039035	Scanbody compatible TCNA2 Nobel Active® 3,5	4,1 mm
42039050	Scanbody compatible TCNA3 Nobel Active® 4,3-5,0	4,1 mm



Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

Scanbodies no directos a implante otras conexiones

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø
42019048	Scanbody compatible TCS6 Straumann Synocta® 4,8	5mm
42048020	Scanbody compatible TCA1 Astra Tech® Pilar recto 20°	3,4 mm
42048045	Scanbody compatible TCA2 Astra Tech® Pilar recto 45°	3,4 mm




Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

Tornillos BioCAM para tornillos chimeneas anguladas conexión Ticare

REF.	DESCRIPCIÓN	
443010151	Tornillo para chimeneas anguladas Inhex STD M 1,6 L 7,2	
44301452	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,4 L 5,2	
44301439	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,4 L 3,9	
44301467	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,4 L 6,7	
44301676	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,6 L 7,6 (cabeza 2,1)	
44301678	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,6 L 7,8 (cabeza 2)	
44301681	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,6 L 8,1	
44301841	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,8 L 4,1	
44301857	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,8 L 5,7	
44301874	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,8 L 7,4	
44302047	Tornillo para chimeneas anguladas M 2 L 4,7	
44302070	Tornillo para chimeneas anguladas M 2 L 7,0	
44302072	Tornillo para chimeneas anguladas M 2 L 7,2 punta esférica	
44302562	Tornillo para chimeneas anguladas M 2,5 L 6,2	

SCANBODIES DIRECTOS OTRAS CONEXIONES

- Scanbodies para uso con escáner intraoral y de sobremesa.
- Los scanbodies se atornillan con el destornillador hexagonal 1,25 mm a un torque de 3 Ncm.

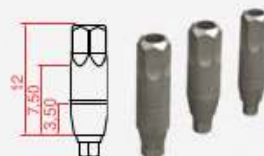

SCANBODIES NO DIRECTOS OTRAS CONEXIONES

- Scanbodies para uso con escáner intraoral y de sobremesa.
- Los scanbodies se atornillan con el destornillador hexagonal 1,25 mm a un torque de 3 Ncm.



Correspondencias tornillos chimeneas anguladas - conexiones BioCAM

FAB.	PLATAFORMA	TORN. CHIMENEAS ANG.	ANGULACIÓN MAX.
Ticare	Osseous 3,3 MINI - 3,4/3,75/4,25 STD	44302070	0° a 30°
Ticare	Osseous 5,0 MAXI	44302562	0° a 20°
Ticare	Multiunit	44301439	0° a 30°
Ticare	Cónico 10° STD/MAXI NO ROT/ROT	44302047	0° a 30°
Ticare	Cónico 10° MINI ROT	44302047	0° a 30°
Ticare	Cónico 30° STD/MAXI ROT	44302047	0° a 30°
Ticare	Inhex 3,3 MINI NO ROT/ROT	44301467	0° a 15°
Ticare	Inhex 3,3 MINI TCP NO ROT/ROT	No disponible	-
Ticare	Inhex 3,75/4,25 STD NO ROT/ROT	443010151	0° a 20°
Ticare	Inhex 3,75/4,25 STD TCP H2 NO ROT/ROT	44301679	0° a 20°
Ticare	Inhex 3,75/4,25 STD TCP H3-4 NO ROT/ROT	44301698	0° a 20°
Ticare	Inhex 5,0 MAXI NO ROT/ROT	44302070	0° a 20°
Ticare	Inhex 5,0 MAXI TCP H2-3-4 NO ROT/ROT	44302083	0° a 20°
Astra Tech	AstraTech 20° UniAbutment	44301452	0° a 20°
Astra Tech	AstraTech 45° UniAbutment	44301452	0° a 20°
Biomet 3i	3i Micro-Mini	44302070	0° a 30°
Biomet 3i	3i Standard	44302070	0° a 30°
Biomet 3i	3i 5,0	44302070	0° a 30°
Biomet 3i	3i Certain 3,4 NO ROT/ROT	44301676	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 4,1 NO ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 4,1 ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 5,0 NO ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 5,0 ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 6,0 NO ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 6,0 ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Ceratin Low Profile Abutment	44301439	0° a 30°
Nobel	Nobel Replace 3,5 NP NO ROT/ROT	44301874	0° a 20°
Nobel	Nobel Replace 4,3 RP/5,0 WP/6,0 WP NO ROT/ROT	44302072	0° a 20°
Nobel	Nobel Active NP 3,5 NO ROT/ROT	44301676	0° a 20°
Nobel	Nobel Active RP 4,3/5,0 NO ROT/ROT	44302070	0° a 20°
Nobel	Branemark System NP NO ROT/ROT	44301676	0° a 20°
Nobel	Multi-unit Branemark System WP ROT	44301841	0° a 20°
Straumann	Straumann RN 4,8 Tissue level NO ROT/ROT	44302070	0° a 20°
Straumann	Straumann WN 6,5 Tissue level NO ROT/ROT	44302070	0° a 20°
Straumann	Straumann Bone Level NC NO ROT/ROT	44301681	0° a 20°
Straumann	Straumann Bone Level RC NO ROT/ROT	44301681	0° a 20°
Straumann	Straumann SynOcta 4,8 RN NO ROT/ROT	44302047	0° a 20°
Straumann	Straumann SynOcta 6,5 WN NO ROT/ROT	44302047	0° a 20°
Straumann	Straumann Pilar Roscado TAN 3,5 ROT	44301452	0° a 30°
Straumann	Straumann Pilar Roscado TAN 4,6 ROT	44301452	0° a 30°
Zimmer	Screw-Vent 3,5/4,5 NO ROT	44301857	0° a 20°
Zimmer	Screw-Vent 3,5/4,5 ROT	44301857	0° a 20°
Zimmer	Screw-Vent 5,7 NO ROT/ROT	44301857	0° a 20°

inHEX

SOLO TICARE ES GAPZERO®

Reduce los
micromovimientos

Elimina los
aflojamientos
de tornillo

GAP ZERO
TECHNOLOGY
ticare

Disminuye el riesgo
de periimplantitis

Mejora el mantenimiento
del hueso marginal

Espira de **doble rosca** que
reduce el tiempo de inserción y
el calentamiento óseo

Superficie RBM-TC para mayor
contacto hueso-implante

Estabilidad **primaria**
y **secundaria**

 ticare

PILARES TCP

**DA MÁS
VOLUMEN A
LOS TEJIDOS
BLANDOS**

Pilar cónico 10° TCP
de emergencia
estrecha

GAP ZERO[®]
TECHNOLOGY
ticare

**EL IMPLANTE LIBRE DE
FILTRACIÓN BACTERIANA**

Implante Ticare
PerioHYBRID





in ^{♥ticare} **HEX**
PRÓTESIS

Sistema de Prótesis Inhex®

Guía de prótesis
Tornillos de cicatrización
Postes de impresión
Pilares directos a implante
Pilar para Zirconio

Pilares de bola y pilar Over-Loc
Pilares transepiteliales
Prótesis temporal / Carga inmediata
Tornillos para pilares y postes
Set prostodoncia

Restauraciones plataforma MINI

TORNILLOS DE CIERRE



TCP

23203321 1 mm
23203322 2 mm

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



23203320 2 mm
23203330 3 mm
23203340 4 mm

POSTES DE IMPRESIÓN



23203303



23235504 Corto L=14mm
23235502 Largo L=20mm
23235505 Enkerado L=29



[Hex] [Cubeta cerrada]
23203324 Corto
23203334 Largo

SCANBODY



[Directo a implante]

41236001 TC10

TCP

TORNILLOS CICATRIZACIÓN



23603320 2 mm
23603330 3 mm
23603340 4 mm
23603350 5 mm



POSTES IMPRESIÓN

[Hex] [Cubeta abierta]
23603303



[Hex] [Cubeta cerrada]
23603324 Corto
23603334 Largo



SCANBODY

[Directo a implante]
41636001 TC10

ATORNILLADAS

UNITARIAS

BIOCAM



Prótesis personalizada
mecanizada en el centro
de fresado Ticare

INTERFASE DE TITANIO HEXAGONAL PARA ZIRCONIO



[Hex]
23237905 0,5 mm
23237910 1 mm
23237920 2 mm
23237930 3 mm



TCP

[Hex]
23637920 2 mm
23637930 3 mm

INTERFASE DINÁMICA HEXAGONAL PARA ZIRCONIO



[Hex]
23237705 0,5 mm
23237710 1 mm
23237720 2 mm
23237730 3 mm



TCP

[Hex]
23637720 2 mm
23637730 3 mm

MÚLTIPLES

INTERFASE DE TITANIO ROTATORIA PARA ZIRCONIO



[Rot]
23237805 0,5 mm
23237810 1 mm
23237820 2 mm
23237830 3 mm



TCP

[Rot]
23637820 2 mm
23637830 3 mm

INTERFASE DINÁMICA ROTATORIA PARA ZIRCONIO



[Rot]
23237605 0,5 mm
23237610 1 mm
23237620 2 mm
23237630 3 mm



TCP

[Rot]
23637620 2 mm
23637630 3 mm

MÚLTIPLES**PILAR CÓNICO 10°**

[Rot]

23201031 10° 1 mm
 23201032 10° 2 mm
 23201033 10° 3 mm

**TCP**

[Rot]

23601032 10° 2 mm
 23601033 10° 3 mm

ELEMENTOS

13203313 Poste de impresión



41005541 Análogo digital



13235110 Cilindro temp. calcin.



41146000 Scanbody (TC2)



13209233 Cilindro titanio



13237902 Interfase p cónico 10°



13203310 Tornillo cicatrización



13209133 Cilindro calcinable



13237602 Interf. dinámica p cónico 10°



13205551 Análogo



13236110 Cilindro temporal tit.

CEMENTADAS**PILARES****BIOCAM**

Prótesis personalizada
 mecanizada en el centro
 de fresado Ticare

FIJO

[Hex]



23207031 1 mm
 23207032 2 mm
 23207033 3 mm

TCP

[Hex]



23607032 2 mm
 23607033 3 mm

ANGULADO

[Hex]

23231015 15° 2 mm
 23231020 20° 2 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO

[Hex]

23237905 0,5 mm
 23237910 1 mm
 23237920 2 mm
 23237930 3 mm

TCP

[Hex]



23637920 2 mm
 23637930 3 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO

[Hex]

23237705 0,5 mm
 23237710 1 mm
 23237720 2 mm
 23237730 3 mm

TCP

[Hex]



23637720 2 mm
 23637730 3 mm

TEMPORALES**PILARES****FIJO**

[Hex]

23232110 2 mm

ANÁLOGO

23205541

ANÁLOGO DIGITAL

41235541

TORNILLOS DE RETENCIÓN

23232526 Tornillo hexagonal



232310151 Tornillo de pilar angulado



13202528 Tornillo prótesis pilar cónico

TCP

23632526 Tornillo hexagonal H2-3

Restauraciones plataforma STD

TORNILLOS DE CIERRE

TCP



23205021	1 mm
23205022	2 mm
23205023	3 mm

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



Ø 4

23204810	1 mm
23204820	2 mm
23204830	3 mm
23204840	4 mm
23204850	5 mm
23204870	7 mm



Ø 5

23206036	3 mm
23206046	4 mm
23206056	5 mm
23206076	7 mm



Ø 6

ESTÉTICO

23206030	3 mm
23206040	4 mm
23206050	5 mm
23206070	7 mm

SCANBODY



[Directo a implante]
41236002 TC11

POSTES DE IMPRESIÓN



[No hex] [Cubeta abierta]

23205503	Corto
23205403	Largo
23205506	Estético



23205504	Corto L=14 mm
23205502	Largo L=20 mm
23205505	Encerado L=29 mm



[Hex] [Cubeta cerrada]

23203724	Corto
23203734	Largo



[No hex] [Cubeta cerrada]

23205600	Corto
23205606	Largo
23205603	Estético

TCP

TORNILLOS CICATRIZACIÓN



23604820	2 mm
23604830	3 mm
23604840	4 mm
23604850	5 mm



POSTES IMPRESIÓN

[Hex] [Cubeta abierta]
23605503



[Hex] [Cubeta cerrada]

23603724	Corto
23603734	Largo



SCANBODY

[Directo a implante]
41636002 TC11

ATORNILLADAS

UNITARIAS

BIOCAM



Prótesis personalizada
mecanizada en el centro
de fresado Ticare

INTERFASE DE TITANIO CEREC®



23207990	0 mm
23207991	1 mm
23207992	2 mm
23207993	3 mm
23207994	4 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO [Hex]



23207905	0,5 mm
23207910	1 mm
23207920	2 mm
23207930	3 mm



TCP

23607920	2 mm
23607930	3 mm
23607940	4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO [Hex]



23207705	0,5 mm
23207710	1 mm
23207720	2 mm
23207730	3 mm



23607720	2 mm
23607730	3 mm
23607740	4 mm

MÚLTIPLES

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO



23207805	0,5 mm
23207810	1 mm
23207820	2 mm
23207830	3 mm



TCP

23607820	2 mm
23607830	3 mm
23607840	4 mm



23207605	0,5 mm
23207610	1 mm
23207620	2 mm
23207630	3 mm



TCP

23607620	2 mm
23607630	3 mm
23607640	4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO [Rot]

MÚLTIPLES

*El pilar cónico de 10° también se puede utilizar para rehabilitaciones unitarias

*PILAR CÓNICO 10°

	23201000	10°	0 mm
	23201001	10°	1 mm
	23201002	10°	2 mm
	23201003	10°	3 mm
	23201004	10°	4 mm
	23201005	10°	5 mm

TCP

	23601002	10°	2 mm
	23601003	10°	3 mm
	23601004	10°	4 mm
	23601005	10°	5 mm

	CILINDROS [Rot]
	13209151 10° Calcinable [blanco]
	13209251 10° Titanio
	13209152 10° Calcinable [rojo]
	13209252 10° Titanio

	CILINDROS TEMPORALES [Rot]
	13206110 10° Titanio

	INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO [Rot]
	13207902 10°
	13207952 10°

INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO

	[Rot]
	13207602 10°
	13207652 10°

	SCANBODY 41146004 10° TC4
---	-------------------------------------

	TORNILLO CICATRIZACIÓN
	13201000 10° (Baja)
	13201010 10° (Alta)

POSTES IMPRESIÓN

	[No Rot] [Cubeta abierta]
	13205213 10° [púrpura]
	[Rot] [Cubeta abierta]
	13205513 10° Titanio
	[Rot] [Cubeta cerrada]
	13205613 10° Titanio

ANÁLOGO

	13205511 10°
---	--------------

ANÁLOGO DIGITAL

	41005511 10°
---	--------------

PILAR CÓNICO 30°

	23203001	30°	1 mm
	23203002	30°	2 mm
	23203003	30°	3 mm
	23203004	30°	4 mm
	23203005	30°	5 mm

TCP

	23603002	30°	2 mm
	23603003	30°	3 mm
	23603004	30°	4 mm
	23603005	30°	5 mm

	CILINDROS [Rot]
	13209153 30° Calcinable [blanco]
	13209253 30° Titanio

	CILINDROS TEMPORALES [Rot]
	13206130 30° Titanio

	INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO [Rot]
	13207953 30°

INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO

	[Rot]
	13207653 30°

	SCANBODY 41146005 30° TC5
---	-------------------------------------

	TORNILLO CICATRIZACIÓN
	13201300 30° (Baja)
	13201310 30° (Alta)

POSTES IMPRESIÓN

	[Rot] [Cubeta abierta]
	13205530 30° Titanio

	[Rot] [Cubeta cerrada]
	13205630 30° Titanio

ANÁLOGO

	13203511 30°
---	--------------

ANÁLOGO DIGITAL

	41003511 30°
---	--------------

MULTIUNIT

RECTO

[No hex]

	23209901	1 mm
	23209902	2 mm
	23209903	3 mm
	23209904	4 mm
	23209905	5 mm

TCP

	23609902	2 mm
	23609903	3 mm
	23609904	4 mm
	23609905	5 mm

ANGULADO

[Hex]

	23201720	17°	2 mm
	23201730	17°	3 mm
	23201740	17°	4 mm
	23203030	30°	3 mm
	23203040	30°	4 mm
	23203050	30°	5 mm

	CILINDROS [Rot]
	13209117 Titanio

	13201751 Calcinable
---	---------------------

	CILINDROS TEMPORALES
	13206710 Titanio
	13205710 Calcinable

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO

	[Rot]
	13207917

	INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO [Rot]
	13207617

	TORNILLO CICATRIZACIÓN
	13201017 (Baja)
	13201027 (Alta)

SCANBODY

	41146006 TC6
---	--------------

POSTES IMPRESIÓN

	[Rot] [Cubeta abierta]
	13205217

	[Rot] [Cubeta cerrada]
	13205617

ANÁLOGO

	13205117
---	----------

ANÁLOGO DIGITAL

	41145117
---	----------

CEMENTADAS

PILARES

BIOCAM



Prótesis personalizada
mecanizada en el centro de
fresado Ticare

FIJO



[Hex] Ø 4
23207000 0 mm
23207010 1 mm
23207012 2 mm
23207013 3 mm
23207014 4 mm



[Hex] Ø 5
23207613 3 mm
23207614 4 mm



[Hex] Ø 6 **ESTÉTICO**
23207513 3 mm
23207514 4 mm



TCP [Hex]
23607012 2 mm
23607013 3 mm
23607014 4 mm

ANGULADO



[Hex] Ø 4
23201015 15° 1 mm
23201315 15° 3 mm
23201515 15° 5 mm
23201020 20° 1 mm
23201320 20° 3 mm
23201520 20° 5 mm



[Hex] Ø 5
23206015 15° 1 mm
23206315 15° 3 mm
23206515 15° 5 mm
23206020 20° 1 mm
23206320 20° 3 mm
23206520 20° 5 mm

INTERFASE DE TITANIO CEREC®



23207990 0 mm
23207991 1 mm
23207992 2 mm
23207993 3 mm
23207994 4 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO



[Hex]
23207905 0,5 mm
23207910 1 mm
23207920 2 mm
23207930 3 mm



TCP [Hex]
23607920 2 mm
23607930 3 mm
23607940 4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO



[Hex]
23207705 0,5 mm
23207710 1 mm
23207720 2 mm
23207730 3 mm



TCP [Hex]
23607720 2 mm
23607730 3 mm
23607740 4 mm

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA



23208610 1 mm
23208620 2 mm
23208630 3 mm
23208640 4 mm
23208650 5.5 mm



*Retención de VESTA KEEP® PEEK incluida.
Ref 13208600

OVER-LOC



23209681 1 mm
23209682 2 mm
23209683 3 mm
23209684 4 mm
23209685 5 mm



13209589 Over- Loc para barra
2mm

ACCESORIOS OVER-LOC



19008530 Análogo (4 uds)



19008505 Poste de impresión
(4 uds)



19008519 Pack de procesado
(2 uds)



190080282 Pack de procesado
Locator® para barra
(2 uds)

ANÁLOGO DIGITAL



41235501 Análogo digital

ANÁLOGO



23205501 Análogo



23285501 Análogo llave
prótesis



13205521 Análogo
pilar de bola

TEMPORALES

PILARES

UCLA



[Hex] [Rojo]
23208151 Calcinable

[No Hex] [Blanco]
23207151 Calcinable



[Hex]
23204110 Titanio



[No Hex]
23205110 Titanio

FIJO



[Hex]
23202110 2 mm
[No Hex]
23203110 2 mm

* Plastic cap incluido

TORNILLOS DE RETENCIÓN

DIRECTOS A IMPLANTE



23202526 Tornillo hexagonal



23202508 Tornillo de ranura



443010151 BioCam chimeneas ang.



232010151 Tornillo de pilar angulado



23201726 Tornillo de Multiunit angulado

TCP



23602516 Tornillo hexagonal TCP H2



23602526 Tornillo hexagonal TCP H3-4

NO DIRECTOS A IMPLANTE



13202528 Tornillo para prótesis p. cónico



13201727 Tor. para prótesis p. Multiunit



13201728 Tor. perfil bajo prót. Multiunit

LABORATORIO



23282526 Tornillo de laboratorio (5 uds)

TCP



23682516 Tornillo retención
Laboratorio H2



23682526 Tornillo retención
Laboratorio H3-H4

Restauraciones plataforma MAXI

TORNILLOS DE CIERRE



TCP

23205031 1 mm
23205032 2 mm
23205033 3 mm

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



23205020 2 mm
23205030 3 mm
23205040 4 mm
23205050 5 mm
23205070 7 mm

Ø 4



23206536 3 mm
23206546 4 mm
23206556 5 mm
23206576 7 mm

Ø 5



ESTÉTICO

23206530 3 mm
23206540 4 mm
23206550 5 mm
23206570 7 mm

Ø 6

SCANBODY



[Directo a implante]
41236003 TC12

POSTES DE IMPRESIÓN



[Cubeta abierta]

23205003 Corto
23205007 Largo
23255403 Estético



23205004 Corto L=14mm
23205002 Largo L=20mm
23205005 Enkerado L=29 mm



[Hex] [Cubeta cerrada]

23205024 Corto
23205034 Largo



[No Hex] [Cubeta cerrada]

23205056 Estándar
23205066 Largo
23205306 Estético

TCP



TORNILLOS CICATRIZACIÓN

23605020 2 mm
23605030 3 mm
23605040 4 mm
23605050 5 mm



POSTES IMPRESIÓN

[Hex] [Cubeta abierta]
23605003



[Hex] [Cubeta cerrada]
23605024 Corto
23605034 Largo



SCANBODY

[Directo a implante]
41636003 TC12

ATORNILLADAS

UNITARIAS



Prótesis personalizada
mecanizada en el centro de
fresado Ticare

INTERFASE DE TITANIO CEREC®



23257990 0 mm
23257991 1 mm
23257992 2 mm
23257993 3 mm
23257994 4 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO [Hex]



23257905 0,5 mm
23257910 1 mm
23257920 2 mm
23257930 3 mm

TCP



23657920 2 mm
23657930 3 mm
23657940 4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO [Hex]



23257705 0,5 mm
23257710 1 mm
23257720 2 mm
23257730 3 mm

TCP



23657720 2 mm
23657730 3 mm
23657740 4 mm

MÚLTIPLES

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO



23257805 0,5 mm
23257810 1 mm
23257820 2 mm
23257830 3 mm

TCP



23657820 2 mm
23657830 3 mm
23657840 4 mm



23257605 0,5 mm
23257610 1 mm
23257620 2 mm
23257630 3 mm

TCP



23657620 2 mm
23657630 3 mm
23657640 4 mm

MÚLTIPLES

*El pilar cónico de 10° también se puede utilizar para rehabilitaciones unitarias

*PILAR CÓNICO 10°



23201050	10°	0 mm
23201051	10°	1 mm
23201052	10°	2 mm
23201053	10°	3 mm
23201054	10°	4 mm
23201055	10°	5 mm

TCP



23601052	10°	2 mm
23601053	10°	3 mm
23601054	10°	4 mm
23601055	10°	5 mm

CILINDROS



[Rot]	
13209151	10° Calcinable
13209251	10° Titanio
[No Rot]	
13209152	10° Calcinable [rojo]
13209252	10° Titanio

CILINDROS TEMPORALES



[Rot]	
13206110	10° Titanio

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO




[Rot]	
13207902	10°
[No rot]	
13207952	10°

INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO



[Rot]	
13207602	10°
[No Rot]	
13207652	10°

SCANBODY

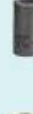

41146004	10° TC4
----------	---------

TORNILLO CICATRIZACIÓN



13201000	10° (Baja)
13201010	10° (Alta)

POSTES IMPRESIÓN




[No Rot]	[Cubeta abierta]
13205213	10° [púrpura]
[Rot]	[Cubeta abierta]
13205513	10° Titanio
[Rot]	[Cubeta cerrada]
13205613	10° Titanio

ANÁLOGO



13205511	10°
----------	-----

ANÁLOGO DIGITAL

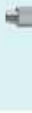

41005511	10°
----------	-----

PILAR CÓNICO 30°



23253001	30°	1 mm
23253002	30°	2 mm
23253003	30°	3 mm
23253004	30°	4 mm
23253005	30°	5 mm

TCP



23653002	30°	2 mm
23653003	30°	3 mm
23653004	30°	4 mm
23653005	30°	5 mm

CILINDROS



[Rot]	
13209153	30° Calcinable [blanco]
13209253	30° Titanio

CILINDROS TEMPORALES



13206130	30° Titanio
----------	-------------

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO




[Rot]	
13207953	30°

INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO



[Rot]	
13207653	30°

SCANBODY

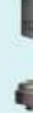


41146005	30° TC5
----------	---------

TORNILLO CICATRIZACIÓN




13201300	30° (Baja)
13201310	30° (Alta)

POSTES IMPRESIÓN

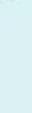


[Rot]	[Cubeta abierta]
13205530	30° Titanio
[Rot]	[Cubeta cerrada]
13205630	30° Titanio

ANÁLOGO

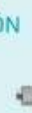

13203511	30°
----------	-----

ANÁLOGO DIGITAL

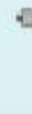

41003511	30°
----------	-----

MULTIUNIT

RECTO

[No hex]



23259901	1 mm
23259902	2 mm
23259903	3 mm
23259904	4 mm
23259905	5 mm

TCP



23659902	2 mm
23659903	3 mm
23659904	4 mm
23659905	5 mm

ANGULADO

[Hex]



23251720	17°	2 mm
23251730	17°	3 mm
23251740	17°	4 mm
23253030	30°	3 mm
23253040	30°	4 mm
23253050	30°	5 mm

CILINDROS



[Rot]	
13209117	Titanio
13201751	Calcinable [Blanco]

CILINDROS TEMPORALES



13206710	Titanio
13205710	Calcinable

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO



[Rot]	
13207917	

INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO




[Rot]	
13207617	

TORNILLO CICATRIZACIÓN




13201017	(Baja)
13201027	(Alta)

SCANBODY

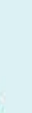


41146006	TC6
----------	-----

POSTES IMPRESIÓN

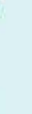


[Rot]	[Cubeta abierta]
13205217	
[Rot]	[Cubeta cerrada]
13205617	

ANÁLOGO

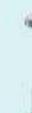

13205117	
----------	--

ANÁLOGO DIGITAL

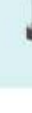

41145117	
----------	--

CEMENTADAS

PILARES

BioCam



Prótesis personalizada
mecanizada en el centro de
fresado Ticare


FIJO

[Hex] Ø 4



23207050 0 mm
23207051 1 mm
23207052 2 mm
23207053 3 mm
23207054 4 mm

[Hex] Ø 5

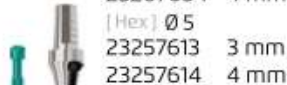


23257613 3 mm
23257614 4 mm

[Hex] Ø 6 ESTÉTICO



23257513 3 mm
23257514 4 mm


TCP [Hex]

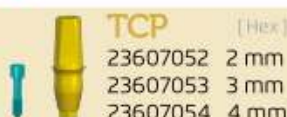

23607052 2 mm
23607053 3 mm
23607054 4 mm


ANGULADO

[Hex] Ø 4

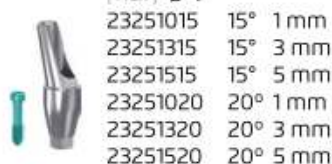


23251015 15° 1 mm
23251315 15° 3 mm
23251515 15° 5 mm
23251020 20° 1 mm
23251320 20° 3 mm
23251520 20° 5 mm

[Hex] Ø 5

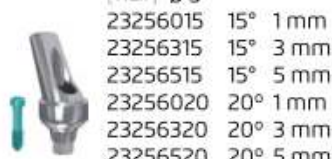

23256015 15° 1 mm
23256315 15° 3 mm
23256515 15° 5 mm
23256020 20° 1 mm
23256320 20° 3 mm
23256520 20° 5 mm

INTERFASE DE TITANIO CEREC®

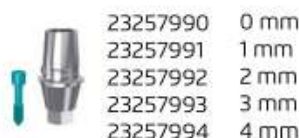


23257990 0 mm
23257991 1 mm
23257992 2 mm
23257993 3 mm
23257994 4 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO



[Hex]
23257905 0,5 mm
23257910 1 mm
23257920 2 mm
23257930 3 mm

TCP [Hex]

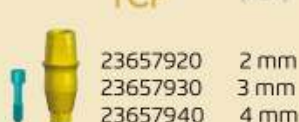

23657920 2 mm
23657930 3 mm
23657940 4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO



[Hex]
23257705 0,5 mm
23257710 1 mm
23257720 2 mm
23257730 3 mm




TCP [Hex]
23657720 2 mm
23657730 3 mm
23657740 4 mm

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA

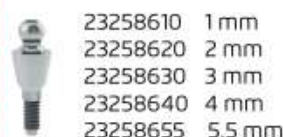


23258610 1 mm
23258620 2 mm
23258630 3 mm
23258640 4 mm
23258655 5.5 mm



*Retención de VESTA KEEP® PEEK incluida.
Ref 13208600

OVER-LOC

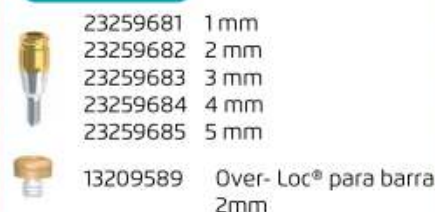

23259681 1 mm
23259682 2 mm
23259683 3 mm
23259684 4 mm
23259685 5 mm
13209589 Over-Loc® para barra
2mm

ACCESORIOS OVER-LOC



19008530 Análogo (4 uds)
19008505 Poste de impresión
(4 uds)
19008519 Pack de procesado
(2 uds)
190080282 Pack de procesado
Locator® para barra
(2 uds)

ANÁLOGO DIGITAL



41235605 Análogo digital

ANÁLOGO



23205605 Análogo



23285605 Análogo llave
prótesis



13205521 Análogo
pilar de bola

TEMPORALES

PILARES

UCLA



[Hex] [Rojo]
23208155 Calcinable
[No Hex] [Blanco]
23207155 Calcinable
[Hex]
23254110 Titanio
[No Hex]
23255110 Titanio

FIJO




[Hex]
23252110 2 mm
[No Hex]
23253110 2 mm

* Plastic cap incluido


TORNILLOS DE RETENCIÓN

DIRECTOS A IMPLANTE

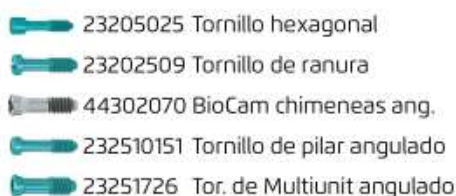


23205025 Tornillo hexagonal
23202509 Tornillo de ranura
44302070 BioCam chimeneas ang.
232510151 Tornillo de pilar angulado
23251726 Tor. de Multiunit angulado

TCP

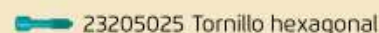

23205025 Tornillo hexagonal

NO DIRECTOS A IMPLANTE

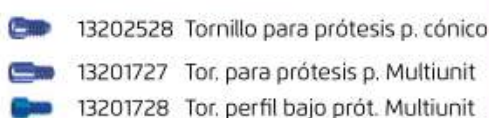

13202528 Tornillo para prótesis p. cónico
13201727 Tor. para prótesis p. Multiunit
13201728 Tor. perfil bajo prót. Multiunit


LABORATORIO



23285025 Tornillo de laboratorio
(5 uds)



Tornillo cierre TCP

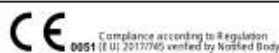

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
1 mm	23203321	23205021	23205031
2 mm	23203322	23205022	23205032
3 mm	-	23205023	23205033



TORNILLO DE CIERRE TCP

- Material: Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:
- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 2,3 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 2,8 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 3,8 mm

Recomendaciones:
- Torque máximo 10 Ncm

Tornillo cicatrización Ø 4 mm



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
1 mm	-	23204810	-
2 mm	23203320	23204820	23205020
3 mm	23203330	23204830	23205030
4 mm	23203340	23204840	23205040
5 mm	-	23204850	23205050
7 mm	-	23204870	23205070



TORNILLO DE CICATRIZACIÓN Ø 4 mm

- Material: Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:
- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 3,4 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,0 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 4,0 mm

Recomendaciones:
- El tornillo de cicatrización debe sobresalir 2 mm por encima de la encía

- Torque máximo 10 Ncm

Tornillo cicatrización Ø 5 mm



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
3 mm	-	23206036	23206536
4 mm	-	23206046	23206546
5 mm	-	23206056	23206556
7 mm	-	23206076	23206576



TORNILLO DE CICATRIZACIÓN Ø 5 mm

- Material: Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 5,0 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 5,0 mm


Recomendaciones:
- El tornillo de cicatrización debe sobresalir 2 mm por encima de la encía

- Torque máximo 10 Ncm

Tornillo cicatrización Ø 6 mm



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
3 mm	-	23206030	23206530
4 mm	-	23206040	23206540
5 mm	-	23206050	23206550
7 mm	-	23206070	23206570

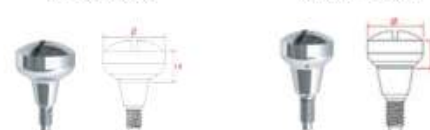

TORNILLO DE CICATRIZACIÓN Ø 6 mm

- Material: Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 6,0 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 6,0 mm

Recomendaciones:
- El tornillo de cicatrización debe sobresalir 2 mm por encima de la encía

- Torque máximo 10 Ncm

Tornillo cicatrización TCP



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23603320	23604820	23605020
3 mm	23603330	23604830	23605030
4 mm	23603340	23604840	23605040
5 mm	23603350	23604850	23605050



TORNILLO DE CICATRIZACIÓN TCP

- Material Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador hexagonal de 1,25

MINI Plataforma 2,30 mm Ø 3,7 mm

STD Plataforma 2,80 mm Ø 4,5 mm

MAXI Plataforma 3,80 mm Ø 4,5 mm


Recomendaciones:

- El tornillo de cicatrización debe sobresalir 2 mm por encima de la encía
- Torque máximo 10 Ncm

Postes de impresión cubeta abierta



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
CORTO	23203303	23205503	23205003
ESTÉTICO	-	23205506	23255403
LARGO	-	23205403	23205007

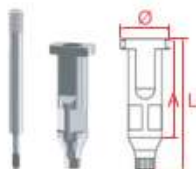

POSTE IMPRESIÓN
HEX IN HEX MINI



POSTE IMPRESIÓN
HEX IN HEX STD



POSTE IMPRESIÓN
HEX IN HEX MAXI

POSTE DE IMPRESIÓN CUBETA ABIERTA

- Material Acero inoxidable
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:

- Plataforma 2,3 mm
- Incluye tornillo. Ref: 23235502
- Ø 3,3 mm L=13 mm A=11 mm

STD:

- Plataforma 2,8 mm
- Incluye tornillo Ref: 23205502
- Poste de Impresión Hex:
- Ø: 4,0 mm L= 13,5 mm A= 11 mm
- Poste de Impresión Hex. estético:
- Ø: 6,0 mm L= 13,5 mm A= 11 mm
- Poste de Impresión Hex. largo:
- Ø: 4,1 mm. L= 17 mm. A= 15 mm

MAXI:

- Plataforma 3,8 mm
- Incluye tornillo Ref: 23205002
- Poste de Impresión Hex:
- Ø: 4 mm L= 15 mm A= 11 mm
- Poste de Impresión Hex. estético:
- Ø: 6,0 mm L= 15 mm A= 11 mm
- Poste de Impresión Hex. largo:
- Ø: 4 mm L= 18,5 mm A= 15 mm

Recomendaciones:

- Para restauraciones unitarias o múltiples
- Torque máximo 10 Ncm

Postes de impresión cubeta abierta TCP



DESCRIPCIÓN	MINI	STD	MAXI
CORTO	23603303	23605503	23605003



POSTE IMPRESIÓN
HEX IN HEX MINI TCP



POSTE IMPRESIÓN
HEX IN HEX STD TCP



POSTE IMPRESIÓN
HEX IN HEX MAXI TCP

POSTE DE IMPRESIÓN CUBETA ABIERTA TCP

- Material acero inoxidable
- Destornillador Hexagonal de 1,25 mm

MINI

- Plataforma 2,3 mm
- Incluye tornillo Ref. 23635502
- Ø 5 mm L=13,5 mm A=11 mm

STD

- Plataforma 2,8 mm
- Incluye tornillo Ref. 23605502
- Ø 4 mm L=13,5 mm A=11 mm

MAXI

- Plataforma 3,8 mm
- Incluye tornillo 23205002
- Ø 4 mm L=15 mm A=11 mm

Recomendaciones:

- Para restauraciones unitarias o múltiples
- Torque máximo 10 Ncm



Postes de impresión cubeta cerrada



	DESCRIPCIÓN	MINI	STD	MAXI
[Hex]	CORTO	23203324	23203724	23205024
	LARGO	23203334	23203734	23205034
[No Hex]	CORTO		23205600	23205056
	ESTÉTICO	-	23205603	23205306
	LARGO	-	23205606	23205066



POSTE IMPRESIÓN HEX
INHEX MINI CORTO



POSTE IMPRESIÓN HEX
INHEX STD CORTO



POSTE IMPRESIÓN HEX
INHEX MAXI CORTO



POSTE IMPRESIÓN HEX
INHEX MINI LARGO



POSTE IMPRESIÓN HEX
INHEX STD LARGO



POSTE IMPRESIÓN HEX
INHEX MAXI LARGO

POSTE DE IMPRESIÓN CUBETA CERRADA

- Material Acero inoxidable
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:

- Plataforma 2,3 mm
- Poste de impresión corto:
Ø 3,3 mm L= 13 mm A= 11 mm
- Poste de impresión largo:
Ø 3,3 mm L= 20,50 mm A= 18 mm

STD:

- Plataforma 2,8 mm
- Poste de impresión corto:
Ø 4,1 mm L= 13,50 mm A= 11 mm
- Poste de impresión largo:
Ø 4,1 mm L= 20,50 mm A= 18 mm

MAXI:

- Plataforma 3,8 mm
- Poste de impresión corto:
Ø 4,1 mm L= 15 mm A= 11 mm
- Poste de impresión largo:
Ø 4,1 mm L= 22 mm A= 18 mm

Recomendaciones:

- Para restauraciones unitarias o múltiples
- Torque máximo 10 Ncm

Postes de impresión cubeta cerrada TCP



	DESCRIPCIÓN	MINI	STD	MAXI
	CORTO	23603324	23603724	23605024
	LARGO	23603334	23603734	23605034



POSTE IMPRESIÓN
TCP INHEX
MINI CORTO



POSTE IMPRESIÓN
TCP INHEX
STD CORTO



POSTE IMPRESIÓN
TCP INHEX
MAXI CORTO



POSTE IMPRESIÓN
TCP INHEX
MINI LARGO



POSTE IMPRESIÓN
TCP INHEX
STD LARGO



POSTE IMPRESIÓN
TCP INHEX
MAXI LARGO

POSTE DE IMPRESIÓN CUBETA CERRADA TCP

- Material Acero inoxidable
- Emergencia TCP
- Destornillador hexagonal 1,25 mm
- Incluye tornillo

MINI:

- Plataforma 2,3 mm
- Poste de impresión corto:
Ø: 3,4 mm L=13,5 mm A=11 mm
- Poste de impresión largo:
Ø 3,4 mm L= 20,50 mm A= 18 mm

STD:

- Plataforma 2,8 mm
- Poste de impresión corto:
Ø: 4,1 mm L= 13,50 mm A= 11 mm
- Poste de impresión largo:
Ø 4,1 mm L= 20,50 mm A= 18 mm


MAXI:

- Plataforma 3,8 mm
- Poste de impresión corto:
Ø 4,1 mm L= 15 mm A= 11 mm
- Poste de impresión largo:
Ø 4,1 mm L= 22 mm A= 18 mm

Recomendaciones:

- Para restauraciones unitarias o múltiples
- Torque máximo 10 Ncm

Análogos

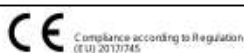


	MINI	STD	MAXI
Análogo implante	23205541	23205501	23205605
Análogo digital	41235541	41235501	41235605
Análogo llave	-	23285501	23285605



Interfase de titanio para CEREC[®]



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0,5 mm	-	23207990	23257990
1 mm	-	23207991	23257991
2 mm	-	23207992	23257992
3 mm	-	23207993	23257993
4 mm	-	23207994	23257994

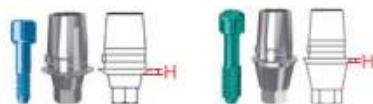

Interfase de titanio hexagonal para zirconio



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0,5 mm	23237905	23207905	23257905
1 mm	23237910	23207910	23257910
2 mm	23237920	23207920	23257920
3 mm	23237930	23207930	23257930



ANÁLOGOS

- Material Acero inoxidable

MINI:

- Plataforma 2,3 mm
- Ø: 3,3 mm

STD:

- Plataforma 2,8 mm
- Ø: 4,0 mm

MAXI:

- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 5,0 mm

Análogos para modelo de escayola:

- Diseño en una pieza, altamente retentivo.
- Un solo uso

Análogos digitales:

- Diseño en dos piezas roscadas y amplia superficie de posicionamiento axial, radial y angular para una fácil y precisa colocación en el modelo 3D

Análogo llave

- Para sujetar y retocar cómodamente el pilar o la corona tanto en clínica como en laboratorio

INTERFASE DE TITANIO PARA CEREC

- Material Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Para realizar restauraciones personalizadas en zirconio
- Para restauraciones unitarias atornilladas
- Altura gingival (H) desde 0 hasta 4 mm
- Incluye el tornillo de pilar: STD Ref: 23202526; MAXI Ref: 23205025
- Compatibilidad de la librería digital CEREC[®] de Sirona, Ref. 901-8317. Scanbody no incluido

Recomendaciones

- Torque: 30 Ncm

INTERFASE DE TTT. HEX. PARA ZIRCONIO

- Material Titanio grado V
- Altura gingival (H) desde 0,5 hasta 3 mm. L= 4mm
- Ø: 3,7 mm (Mini); 4,5 (Std y Maxi)
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Para realizar restauraciones personalizadas en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones unitarias
- Toma de impresión: Consulte scanbodyes pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad[®], 3Shape[®] y Dentalwings[®]
- Incluye el tornillo de pilar: MINI Ref: 23232526; STD Ref: 23202526 y MAXI Ref: 23205025

Recomendaciones:

- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD Y MAXI: 30 Ncm



Interfase dinámica hexagonal para zirconio



[Hex]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0,5 mm	23237705	23207705	23257705
1 mm	23237710	23207710	23257710
2 mm	23237720	23207720	23257720
3 mm	23237730	23207730	23257730



INTERFASE DIN. HEX. PARA ZIRCONIO

- Material Titanio grado V
- Altura gingival (H) desde 0,5 hasta 3 mm. L= 4
- Ø:3,7 (Mini); 4,5 (Std y Maxi)
- Destornillador dinámico
- Para realizar restauraciones personalizadas en zirconio
- Para restauraciones unitarias atornilladas
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Incluye el tornillo de interfase. Ver tabla página 60

Recomendaciones:

- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD Y MAXI:30 Ncm

Interfase de titanio rotatoria para zirconio



[Rot]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0,5 mm	23237805	23207805	23257805
1 mm	23237810	23207810	23257810
2 mm	23237820	23207820	23257820
3 mm	23237830	23207830	23257830



Ticare recomienda la utilización de pilares cónicos para múltiples

INTERFASE DE TIT. ROT ZIRCONIO

- Material Titanio grado V
- Altura gingival (H) desde 0,5 hasta 3 mm. L= 4
- Ø:3,7 (Mini); 4,5 (Std y Maxi)
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Para realizar restauraciones personalizadas en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones múltiples
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Incluye el tornillo de pilar:
MINI Ref: 23232526; STD Ref:23202526 y MAXI Ref: 23205025

Recomendaciones:

- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD Y MAXI:30 Ncm

Interfase dinámica rotatoria para zirconio



[Rot]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0,5 mm	23237605	23207605	23257605
1 mm	23237610	23207610	23257610
2 mm	23237620	23207620	23257620
3 mm	23237630	23207630	23257630



Ticare recomienda la utilización de pilares cónicos para múltiples

INTERFASE DIN. ROT. PARA ZIRCONIO

- Material Titanio grado V
- Altura gingival (H) desde 0,5 hasta 3 mm. L= 4
- Ø:3,7 (Mini); 4,5 (Std y Maxi)
- Destornillador dinámico
- Para realizar restauraciones personalizadas en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones múltiples
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Incluye el tornillo de interfase. Ver tabla página 60

Recomendaciones:

- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD Y MAXI:30 Ncm

Interfase de titanio hexagonal para zirconio TCP **TCP** **CE**

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23637920	23607920	23657920
3 mm	23637930	23607930	23657930
4 mm	-	23607940	23657940

[Hex]



INTERFASE TIT. HEX PARA ZIRCONIO TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador: 1,25 mm hexagonal
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®

MINI

- Plataforma: 2,30 mm
- Ø 3,7 mm L=4
- Incluye tornillo Ref: 23632526
- Torque: 20 Ncm

STD

- Plataforma: 2,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4
- Incluye tornillo H2 Ref: 23602516
- H3-4 Ref: 23602526
- Torque: 30 Ncm

MAXI

- Plataforma: 3,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4
- Incluye tornillo Ref: 23205025
- Torque: 30 Ncm

Recomendaciones:

- Usado como interfase para rehabilitaciones en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones unitarias

Interfase dinámica hexagonal para zirconio TCP **TCP** **CE**

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23637720	23607720	23657720
3 mm	23637730	23607730	23657730
4 mm	-	23607740	23657740

[Hex]



INTERF. DIN. TIT. HEX. ZIRCONIO TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador dinámico
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®

MINI

- Plataforma: 2,30 mm
- Ø 3,7 mm L=4 mm
- Incluye tornillo de interfase. Ref: 44301490
- Torque: 20 Ncm

STD

- Plataforma: 2,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4 mm
- Incluye tornillo de interfase.
- H2 Ref: 44301679, H3-4 Ref: 44301698
- Torque: 30 Ncm

MAXI

- Plataforma: 3,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4 mm
- Incluye tornillo de interfase.
- H2 Ref: 44302098, H3-4 Ref: 44302018
- Torque: 30 Ncm

Recomendaciones:

- Usado como interfase para rehabilitaciones en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones unitarias

Interfase de titanio rotatoria para zirconio TCP



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23637820	23607820	23657820
3 mm	23637830	23607830	23657830
4 mm		23607840	23657840

[Rot]



Ticare recomienda la utilización de pilares cónicos para múltiples

Interfase dinámica rotatoria para zirconio TCP



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23637620	23607620	23657620
3 mm	23637630	23607630	23657630
4 mm	-	23607640	23657640

[Rot]



Ticare recomienda la utilización de pilares cónicos para múltiples

INTERFASE DE TIT. ROT ZIRCONIO TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador: 1,25 mm hexagonal
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®

MINI

- Plataforma: 2,30 mm
- Ø 3,7 mm L=4
- Incluye tornillo Ref: 23632526
- Torque: 20 Ncm

STD

- Plataforma: 2,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4
- Incluye tornillo H2 Ref: 23602516, H3-4 Ref: 23602526
- Torque: 30 Ncm

MAXI

- Plataforma: 3,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4
- Incluye tornillo Ref: 23205025
- Torque: 30 Ncm

Recomendaciones:

- Usado como interfase para rehabilitaciones en zirconio y otros materiales
- Para atornillar
- Para restauraciones múltiples

INTERFASE DIN. TIT. ROT ZIRCONIO TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador dinámico
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®

MINI

- Plataforma: 2,30 mm
- Ø 3,7 mm L=4 mm
- Incluye tornillo de interfase. Ref: 44301490
- Torque: 20 Ncm

STD

- Plataforma: 2,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4mm
- Incluye tornillo de interfase. H2 Ref: 44301679, H3-4 Ref: 44301698
- Torque: 30 Ncm

MAXI

- Plataforma: 3,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4 mm
- Incluye tornillo de interfase. H2 Ref: 44302098, H3-4 Ref: 44302018
- Torque: 30 Ncm

Recomendaciones:

- Usado como interfase para rehabilitaciones en zirconio y otros materiales
- Para atornillar
- Para restauraciones múltiples

Pilar fijo hexagonal



Compliance according to Regulation 9051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0.5 mm	-	23207000	23207050
1 mm	23207031	23207010	23207051
2 mm	23207032	23207012	23207052
3 mm	23207033	23207013	23207053
4 mm	-	23207014	23207054

[Hex]



PILAR FIJO HEXAGONAL

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones unitarias y múltiples cementadas
- Para restauraciones de zirconio
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Toma de impresión directa a implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de pilar:
MINI Ref: 23232526; STD Ref: 23202526 y
MAXI Ref: 23205025

MINI:

- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 3,7 mm
- α= 2°
- L: 6,5 mm

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,5 mm
- α= 2°
- L: 6,5 mm

MAXI:

- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 4,5 mm
- α= 2°
- L: 6,5 mm

Recomendaciones:

- La altura de la encía debe ser ligeramente superior a la altura del hombro del pilar
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Pilar fijo hexagonal TCP



Compliance according to Regulation 9051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23607032	23607012	23607052
3 mm	23607033	23607013	23607053
4 mm	-	23607014	23607054

[Hex]



PILAR FIJO HEXAGONAL TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador: 1,25 mm hexagonal
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®

MINI

- Plataforma: 2,30 mm
- Ø 3,7 mm L=6,5
- Incluye tornillo Ref: 23632526
- Torque: 20 Ncm

STD

- Plataforma: 2,80 mm
- Ø 4,5 mm L=6,5
- Incluye tornillo H2 Ref: 23602516, H3-4 Ref: 23602526
- Torque: 30 Ncm

MAXI

- Plataforma: 3,80 mm
- Ø 4,5 mm L=6,5
- Incluye tornillo Ref: 23205025
- Torque: 30 Ncm

Recomendaciones:

- Usado como interfase para rehabilitaciones en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones unitarias


Pilar fijo hexagonal Ø 5 mm



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
3 mm	-	23207613	23257613
4 mm	-	23207614	23257614

[Hex]

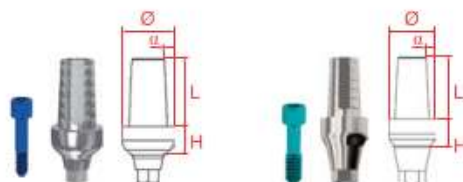

PILAR FIJO HEXAGONAL Ø 5 MM

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones unitarias y múltiples cementadas
- Toma de impresión directa a implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de pilar:
STD Ref: 23202526 y
MAXI Ref: 23205025

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 5,0 mm
- L: 6,5 mm

MAXI:

- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 5,0 mm
- L: 6,5 mm

Recomendaciones:

- La altura de la encía debe ser ligeramente superior a la altura del hombro del pilar
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm


Pilar fijo hexagonal estético



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
3 mm	-	23207513	23257513
4 mm	-	23207514	23257514

[Hex]

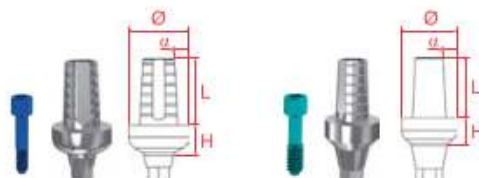

PILAR FIJO HEXAGONAL ESTÉTICO

- Material: Titanio grado V
- Para restauraciones unitarias y múltiples cementadas
- Toma de impresión a nivel de implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de pilar:
STD Ref: 23202526;
MAXI Ref: 23205025

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 6,0 mm
- L: 6,5 mm

MAXI:

- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 6,0 mm
- L: 6,5 mm

Recomendaciones:

- La altura de la encía debe ser ligeramente superior a la altura del hombro del pilar
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Pilar angulado



ANGULACIÓN (α)	ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
15°	1 mm	23231015	23201015	23251015
	3 mm	-	23201315	23251315
	5 mm	-	23201515	23251515
20°	1 mm	23231020	23201020	23251020
	3 mm	-	23201320	23251320
	5 mm	-	23201520	23251520



PILAR ANGULADO

- Material: Titanio grado V
- para restauraciones unitarias y múltiples cementadas
- Toma de impresión a nivel de implante
- Para corregir disparelismos e implantes con ejes axiales incorrectos
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de pilar:

MINI Ref: 232310151

STD Ref: 232010151 (H=1)

Ref: 23202526 (H=3, H=5)

MAXI Ref: 232510151

MINI:

- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 3,7 mm
- L: 6,5 mm

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,0 mm
- L: 6,5 mm

MAXI:

- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 4,0 mm
- L: 6,5 mm


Recomendaciones:

- La altura de la encía debe ser ligeramente superior a la altura del hombro del pilar
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Pilar angulado Ø 5 mm



ANGULACIÓN (α)	ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
15°	1 mm	-	23206015	23256015
	3 mm	-	23206315	23256315
	5 mm	-	23206515	23256515
20°	1 mm	-	23206020	23256020
	3 mm	-	23206320	23256320
	5 mm	-	23206520	23256520

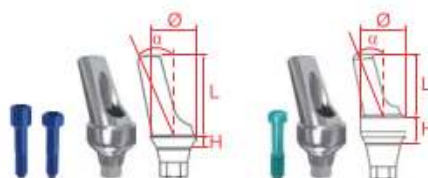

PILAR ANGULADO Ø 5 mm

- Material: Titanio grado V
- Para restauraciones unitarias y múltiples cementadas
- Toma de impresión a nivel de implante
- Para corregir disparelismos e implantes con ejes axiales incorrectos
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de pilar

STD Ref: 232010151 (H=1)

Ref: 23202526 (H=3, H=5)

MAXI Ref: 232510151

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 5,0 mm
- L: 6,5 mm

MAXI:

- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 5,0 mm
- L: 6,5 mm

Recomendaciones:

- La altura de la encía debe ser ligeramente superior a la altura del hombro del pilar
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Sistema de Prótesis Inhex con transepitelial



Pilar cónico



ANGULACIÓN (α)	ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
10°	0 mm	-	23201000	23201050
	1 mm	23201031	23201001	23201051
	2 mm	23201032	23201002	23201052
	3 mm	23201033	23201003	23201053
	4 mm	-	23201004	23201054
	5 mm	-	23201005	23201055
30°	1 mm	-	23203001	23253001
	2 mm	-	23203002	23253002
	3 mm	-	23203003	23253003
	4 mm	-	23203004	23253004
	5 mm	-	23203005	23253005



Caras planas que convierten el aditamento en no rotatorio

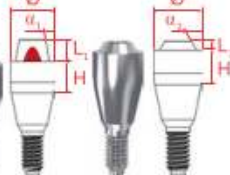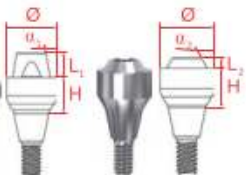

PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones atornilladas múltiples
- Para sobredentaduras sobre barras
- Toma de impresión a nivel de pilar
- El cono superior de 10° y 30° permite la inserción protésica pasiva en rehabilitaciones entre implantes con disparalelismos de hasta 20° y 60° respectivamente.
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:

- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 3,4 mm
- L: 2 mm

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4 mm
- L₁: 2 mm; L₂: 0,75 mm

MAXI:

- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 4 mm
- L₁: 2 mm; L₂: 0,75 mm

Recomendaciones:

- Pilar cónico 10° STD y MAXI para restauraciones unitarias
- Pilar cónico 10° MINI y pilar cónico 30° STD y MAXI para restauraciones múltiples
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Pilar cónico TCP



ANGULACIÓN (α)	ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
10°	2 mm	23601032	23601002	23601052
	3 mm	23601033	23601003	23601053
	4 mm	-	23601004	23601054
	5 mm	-	23601005	23601055
30°	2 mm	-	23603002	23653002
	3 mm	-	23603003	23653003
	4 mm	-	23603004	23653004
	5 mm	-	23603005	23653005




10°




30°

Caras planas que convierten el aditamento en no rotatorio

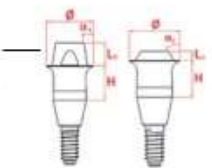

Caras planas que convierten el aditamento en no rotatorio

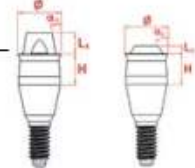

PILAR CÓNICO TCP

- Material: Titanio Grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador: 1,25 mm hexagonal

MINI:

- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 3,4 mm
- L₁: 2 mm; L₂: 0,75 mm

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4 mm
- L₁: 2 mm; L₂: 0,75 mm

MAXI:

- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 4 mm
- L₁: 2 mm; L₂: 0,75 mm

Recomendaciones:

- Pilar cónico 10° STD y MAXI para restauraciones unitarias.
- Pilar cónico 10° MINI y pilar cónico 30° STD y MAXI para restauraciones múltiples
- Para atornillar
- Sus angulaciones de 10° y de 30° le ayudan a corregir disparalelismos entre implantes hasta 20° y 60°.
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD y MAXI: 30 Ncm

Interfase de titanio para zirconio pilar cónico



ANGULACIÓN (α)	DESCRIPCIÓN	MINI	STD / MAXI
10°	Rotatorio	13237902	13207902
	No rotatorio	-	13207952
30°	Rotatorio	-	13207953
	No rotatorio	-	-




Interfase dinámica para zirconio pilar cónico




ANGULACIÓN (α)	DESCRIPCIÓN	MINI	STD / MAXI
10°	Rotatorio	13237602	13207602
	No rotatorio	-	13207652
30°	Rotatorio	-	13207653
	No rotatorio	-	-



Pilar titanio pilar cónico

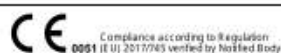

ANGULACIÓN (α)	DESCRIPCIÓN	MINI	STD/MAXI
10°	Rotatorio	13209233	13209251
	No rotatorio	-	13209252
30°	Rotatorio	-	13209253
	No rotatorio	-	-

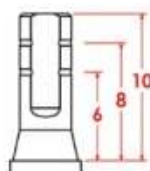

MINI

STD/MAXI

INTERFASE DE TITANIO PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Para estructuras personalizadas en zirconio sobre pilares cónicos
- Para restauraciones múltiples atornilladas
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Consultar scanbodies en pág. 24

MINI:

- Ø: 3,4 mm L: 5,5 mm H: 0,85 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref. 13202528

STD/MAXI:

- Ø: 4,1 mm L: 5,05 mm H: 0,40 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref. 13202528

Recomendaciones:

- MINI: Torque 15 Ncm
- STD/MAXI: Torque 20 Ncm

INTERFASE DINÁMICA PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Para estructuras personalizadas en zirconio sobre pilares cónicos
- Para restauraciones múltiples atornilladas
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Destornillador dinámico
- Consultar scanbodies en pág. 24

MINI:

- Ø: 3,4 mm L: 5,5 mm H: 0,85 mm
- Incluye el tornillo para prótesis (Ref. 44302041)

STD/MAXI:

- Ø: 4,1 mm L: 5,05 mm H: 0,40 mm
- Incluye el tornillo para prótesis (Ref. 44302041)

Recomendaciones:

- MINI: Torque 15 Ncm
- STD/MAXI: Torque 20 Ncm

PILAR TITANIO PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Altura de cementación 10mm con pre-cortes a 8 y 6 mm
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Consultar scanbodies en pág. 24

MINI:

- Ø: 3,4 mm H: 1 mm L: 11 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref. 13202528

STD/MAXI:

- Ø: 4 mm H: 1 mm L: 11 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref. 13202528

Recomendaciones:

- Los no rotatorios se presentan en color púrpura para una fácil identificación
- Torque MINI: 15 Ncm
- Torque STD/MAXI: 20 Ncm



Sistema de Prótesis Inhex con transepitelial

Cilindro calcinable pilar cónico



ANGULACIÓN (α)	DESCRIPCIÓN	MINI	STD/MAXI
10°	Rotatorio	13209133	13209151
	No rotatorio	-	13209152
30°	Rotatorio	-	13209153
	No rotatorio	-	-



CILINDRO CALCINABLE PILAR CÓNICO

- Material: Plástico calcinable
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:

- Ø: 3,4 mm H: 1 mm L: 11 mm
- Incluye el tornillo para prótesis
- Ref: 13202528

STD/MAXI:

- Ø: 4 mm H: 1 mm L: 11 mm
- Incluye el tornillo para prótesis
- Ref: 13202528

Recomendaciones:

- Los calcinables no rotatorios se presentan en color rojo para una fácil identificación
- Torque MINI: 15 Ncm
- Torque STD/MAXI: 20 Ncm

Tornillo de cicatrización pilar cónico



ANGULACIÓN (α)	MINI	STD/MAXI
10°	13203310	13201000 (baja) 13201010 (alta)
30°		13201300 (baja) 13201310 (alta)



TORN. CICATRIZACION PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

10° MINI:

- Ø: 3,4 mm
- L: 4,40 mm
- La Ref: 13203310 incluye tornillo

10° STD y MAXI:

- Ø: 4 mm
- L: 3,70 mm (baja) L: 4,40 mm (alta)

30° STD Y MAXI:

- Ø: 4 mm
- L: 2,45 mm (baja) L: 4,40 mm (alta)

Recomendaciones:

- Torque: 10 Ncm

Postes de impresión pilar cónico cubeta abierta

ANGULACIÓN (α)		MINI	STD/MAXI
10°	[rot] [No rot]	13203313	13205513 13205213
30°	[rot]	-	13205530



10° MINI



10° STD/MAXI ROT



10° STD/MAXI NO ROT



30° STD/MAXI

POSTES IMPRESIÓN CUB ABIERTA

- Material Acero inoxidable

MINI:

- Ø: 3,4 mm L: 11 mm H: 3 mm

STD/MAXI:

- Ø: 4 mm L: 11 mm H: 3 mm

- Poste pilar cónico 10° MINI y STD/MAXI incluye el tornillo de poste de impresión Ref: 132055331
- Poste pilar cónico 30° STD/MAXI incluye el tornillo de poste de impresión Ref: 132055302
- El poste de impresión no rotatorio se presenta en color púrpura
- Tornillo poste impresión largo pilar cónico 10° mini/std/maxi Ref: 132055332
- Tornillo poste impresión largo pilar cónico 30° Ref: 132055301

Postes de impresión pilar cónico cubeta cerrada

ANGULACIÓN (α)		MINI	STD/MAXI
10°	[rot]	-	13205613
30°	[rot]	-	13205630



POSTES IMPRESIÓN CUB CERRADA

- Material Acero inoxidable
- L: 8,5 mm

STD/MAXI:

- Ø: 4,1 mm L: 8,5 mm H: 2,8 mm

- Los postes de impresión de cubeta cerrada son de una sola pieza.

Análogo pilar cónico

ANGULACIÓN (α)		MINI	STD/MAXI
10°	Análogo	13205551	13205511
	Análogo digital	41005541	41005511
30°	Análogo	-	13203511
	Análogo digital	-	41003511



ANÁLOGO PILAR CÓNICO

- Material Acero inoxidable

Análogo para modelo de escayola:

- Diseño en una pieza, altamente retentivo.
- Un sólo uso.

Análogo digital:

- Diseño en dos piezas roscadas y amplia superficie de posicionamiento axial, radial y angular para una fácil y precisa colocación en el modelo 3D.
- Una vez finalizado el trabajo se pueden desmontar y reutilizar en otro modelo siempre que no haya sufrido daños.

Pilares Multiunit

Pilar Multiunit recto



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
1 mm	-	23209901	23259901
2 mm	-	23209902	23259902
3 mm	-	23209903	23259903
4 mm	-	23209904	23259904
5 mm	-	23209905	23259905



Transportador manual
incluido para
posicionar en boca



PILAR MULTIUNIT RECTO

- Material Titanio grado V
- Para estructuras atornilladas sobre pilares
- Toma de impresión a nivel de pilar
- El cono superior de 20° permite la inserción protésica pasiva en rehabilitaciones entre implantes con disparalelismos de hasta 40°.
- Para atornillar utilizar llave dinamométrica Ref: 14658040 y extensor de carraca Ref: 14658009 (Corto) y 14658016 (Largo). También se puede atornillar con contra-ángulo Ref: 23209021.

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,8 mm L: 2,2 mm; $\alpha_1=20^\circ$

MAXI:

- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 4,8 mm L: 2,2 mm; $\alpha_1=20^\circ$

Recomendaciones:

- Torque STD/MAXI: 30 Ncm


Pilar Multiunit recto TCP



ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	-	23609902	23659902
3 mm	-	23609903	23659903
4 mm	-	23609904	23659904
5 mm	-	23609905	23659905



Transportador manual
incluido para
posicionar en boca

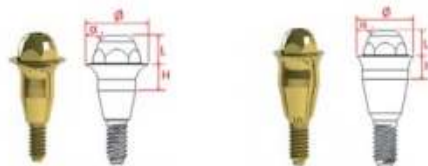

PILAR MULTIUNIT TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Para estructuras atornilladas sobre pilares
- Toma de impresión a nivel de pilar
- El cono superior de 20° permite la inserción protésica pasiva en rehabilitaciones entre implantes con disparalelismos de hasta 40°
- Para atornillar utilizar llave dinamométrica Ref: 14658040 y extensor de carraca Ref: 14658009 (Corto) y 14658016 (Largo). También se puede atornillar con contra-ángulo Ref: 23209021.

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,8 mm L: 2,2 mm; $\alpha_1=20^\circ$

MAXI:

- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 4,8 mm L: 2,2 mm; $\alpha_1=20^\circ$

Recomendaciones:

- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Pilar Multiunit angulado



[Hex]

ANGULACIÓN (α)	ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
17°	2 mm	-	23201720	23251720
	3 mm	-	23201730	23251730
	4 mm	-	23201740	23251740
30°	3 mm	-	23203030	23253030
	4 mm	-	23203040	23253040
	5 mm	-	23203050	23253050



Incluye vástago de
posicionamiento
para facilitar la inserción



PILAR MULTIUNIT ANGULADO

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones múltiples atornilladas
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Para corregir grandes disparalelismos entre implantes
- Pilares de 17°: $\alpha_1 = 20^\circ$ $\alpha_2 = 17^\circ$
- Pilares de 30°: $\alpha_1 = 20^\circ$ $\alpha_2 = 30^\circ$
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de multiunit angulado (STD Ref: 23201726; MAXI Ref: 23251726)
- Incluye vástago de posicionamiento

Recomendaciones:

- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Tornillo cicatrización pilar Multiunit



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

STD / MAXI

17°/20°/30°	13201017 (baja)
Compatible multiunit recto y angulado	13201027 (alta)



Poste impresión pilar Multiunit cubeta abierta



Compliance according to Regulation
(EU) 2017/745

STD / MAXI

Rotatorio

17°/20°/30°	13205217
Compatible multiunit recto y angulado	



Poste impresión pilar Multiunit cubeta cerrada



Compliance according to Regulation
(EU) 2017/745

STD / MAXI

Rotatorio

17°/20°/30°	13205617
Compatible multiunit recto y angulado	



Análogo pilar Multiunit



Compliance according to Regulation
(EU) 2017/745

STD / MAXI

Rotatorio

17°/20°/30°	Análogo	13205117
Compatible multiunit recto y angulado	Análogo digital	41145117



Interfase de titanio para zirconio pilar Multiunit



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

STD / MAXI

Rotatorio

17°/20°/30°	13207917
Compatible multiunit recto y angulado	



TORNILLO CICATRIZACIÓN PILAR MULTIUNIT

- Material Titanio grado V
- Ø: 4,8 mm
- L: 3,95 mm (baja) L: 4,70 mm (alta)
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

Recomendaciones:

- Torque: 10 Ncm

POSTE IMPRESIÓN P. MULTIUNIT

- Material Acero inoxidable
- Ø: 4,8 mm
- L: 11 mm
- H: 3,5 mm
- Incluye el tornillo de poste de impresión Ref: 132055371

Recomendaciones:

- Torque: 10 Ncm

POSTE IMPRESIÓN P. MULTIUNIT

- Material Acero inoxidable
- Ø: 4,8 mm
- L: 8,5 mm
- H: 2,8 mm
- Los postes de impresión de cubeta cerrada son de una sola pieza

Recomendaciones:

- Torque: 10 Ncm

ANÁLOGO PILAR MULTIUNIT

- Material: Acero inoxidable
- Ø: 4,8 mm

Análogo para modelos de escayola:

- Diseño de una pieza, altamente retentivo.
- Un solo uso.

Análogo para flujo digital:

- Diseño en dos piezas roscadas y amplia superficie de posicionamiento para una fácil y precisa colocación. Una vez finalizado el trabajo se pueden desmontar y reutilizar en otro modelo siempre que no haya sufrido daños.

INTERFASE DE TITANIO PILAR MULTIUNIT

- Material Titanio grado V
- Para realizar estructuras personalizadas en zirconio sobre pilares multiunit rectos o angulados
- Para restauraciones múltiples atornilladas.
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Ø: 4,8 mm L: 5,5 mm H: 0,85 mm
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13201727

Recomendaciones:


- Torque: 15 Ncm

Pilares Multiunit

Interfase dinámica para zirconio pilar Multiunit



Rotatorio	STD / MAXI	
	17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13207617

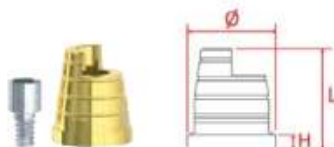


INTERFASE DINÁMICA PILAR MULTIUNIT

- Material Titanio grado V
- Para realizar estructuras personalizadas en zirconio sobre pilares multiunit rectos o angulados
- Para restauraciones múltiples atornilladas.
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Ø: 4,8 mm L: 5,5 mm H: 0,85 mm
- Destornillador dinámico
- Incluye el tornillo de interfase.
Ref: 44301440


Recomendaciones:

- Torque: 15 Ncm

Cilindro titanio pilar Multiunit

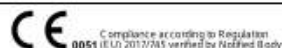

Rotatorio	STD / MAXI	
	17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13209117

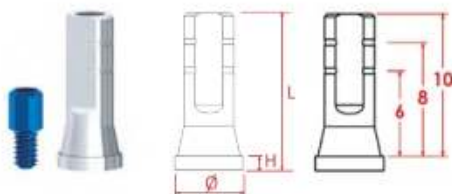

CILINDRO DE TITANIO PILAR MULTIUNIT

- Material Titanio grado V
- Ø: 4,8 mm L: 11 mm H: 1 mm
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Altura de cementación 10mm con pre-cortes a 8 y 6 mm
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Consultar scanbodies en pág. 24
- Incluye tornillo para prótesis Ref: 13201727

Recomendaciones:

- Torque: 15 Ncm

Cilindro calcinable pilar Multiunit



Rotatorio	STD / MAXI	
	17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13201751



CILINDRO CALCINABLE PILAR MULTIUNIT

- Material: Plástico calcinable
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye tornillo para prótesis Ref: 13201727
- Ø: 4,8 mm L: 11 mm H: 1 mm

Recomendaciones:

- Torque: 15 Ncm

Pilar fijo altura 2 mm tallable



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/745 verified by notified Body

[No Hex] [Hex]

MINI

23232110

STD

23202110

23203110

MAXI

23252110

23253110



Plastic cap: Solo para STD y MAXI
Facilita y asegura un correcto ajuste de la prótesis temporal



Pilar ucla titanio temporal



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/745 verified by notified Body

[No Hex] [Hex]

MINI

-

STD

23204110

23205110

MAXI

23254110

23255110



Pilar ucla calcinable temporal



Compliance according to Regulation
(EU) 2017/745

[Hex]
[Rojo]

MINI

-

STD

23208151

23207151

MAXI

23208155

23207155



PILAR FIJO ALTURA 2 MM TALLABLE

- Material: Titanio grado V
- Para restauraciones temporales cementadas y atornilladas unitarias y restauraciones cementadas múltiples
- Superficie retentiva para una fácil adhesión del provisional
- Incluye un plastic cap (STD y MAXI) para una fabricación sencilla y una correcta adaptación de la corona provisional
- Toma de impresión a nivel de implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de retención: MINI Ref. 23232526; STD Ref. 23202526 y MAXI Ref. 23205025

MINI:

- Ø: 3,7 mm L: 6,5 mm H: 2 mm

STD/MAXI:

- Ø: 4,5 mm L: 6,5 mm H: 2 mm
- L: plastic cap: 7,6 mm

Recomendaciones:

- Para permanecer 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

PILAR TITANIO TEMPORAL

- Material: Titanio grado V
- Para restauraciones temporales cementadas unitarias y múltiples y atornilladas unitarias
- Para trabajar tanto en clínica como en laboratorio
- Superficie retentiva para una fácil adhesión del provisional
- Toma de impresión a nivel de implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de retención: STD Ref. 23202526; y MAXI Ref. 23205025

STD:

- Ø: 4,3 mm L: 11 mm H: 3,5 mm

MAXI:

- Ø: 4,3 mm L: 11 mm H: 5 mm

Recomendaciones:

- Para permanecer 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

PILAR UCLA TEMPORAL

- Material Plástico calcinable
- Para restaurar directo al implante
- Plataforma STD 2,80 mm
- Plataforma MAXI 3,80 mm
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

STD:

- Ø: 4,3 mm L: 11 mm H: 3,5 mm

MAXI:

- Ø: 4,3 mm L: 11 mm H: 5 mm

Recomendaciones:

- En restauraciones unitarias se recomienda utilizar hexagonal
- Para restauraciones provisionales, válido para 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm
- Incluye tornillo: STD Ref. 23202526; y MAXI Ref. 23205025

Pilar temporal de titanio para pilar cónico



[Rotatorio]		
	MINI	STD/MAXI
10°	13236110	13206110
30°	-	13206130

PILAR TEMPORAL DE TITANIO PARA PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones temporales atornilladas múltiples sobre pilar cónico
- Superficie retentiva para fácil adhesión del provisional
- Permite la confección de prótesis provisionales en protocolos de carga inmediata
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13202528

MINI:

- Ref: 13236110: Ø: 3,4 mm L: 11 mm H: 1 mm

STD/MAXI:

- Ref: 13206110: Ø: 4,1 mm L: 11 mm H: 1 mm
- Ref: 13206130: Ø: 4,1 mm L: 11 mm H: 1 mm
- STD y MAXI aditamentos compatibles

Recomendaciones:

- Para permanecer 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

Pilar temporal calcinable para pilar cónico MINI



[Rotatorio]		
	MINI	
10°	13235110	

PILAR TEMPORAL CALCINABLE PARA PILAR CÓNICO MINI

- Material: plástico calcinable
- Para atornillar
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Superficie retentiva para fácil adhesión del provisional
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13202528

MINI: Ø: 3,4 mm L: 11 mm H: 1 mm

Recomendaciones:

- 2 a 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

Pilar temporal de titanio para pilar Multiunit



[Rotatorio]		
	STD / MAXI	
17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13206710	

PILAR TEMPORAL DE TITANIO PARA MULTIUNIT

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones temporales atornilladas múltiples sobre pilar multiunit
- Superficie retentiva para fácil adhesión del provisional
- Permite la confección de prótesis provisionales en protocolos de carga inmediata
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13201727


STD/MAXI:

- Ø: 3,3 mm L: 11 mm H: 1 mm

Recomendaciones:

- Para permanecer 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

Pilar temporal calcinable para pilar Multiunit

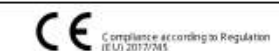

[Rotatorio]		
	STD / MAXI	
17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13205710	

PILAR TEMPORAL CALCINABLE PARA MULTIUNIT

- Material: Plástico calcinable
- Para atornillar
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Superficie retentiva para fácil adhesión del provisional
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13201727


STD/MAXI:

- Ø: 3,3 mm L: 11 mm H: 1 mm


Recomendaciones:

- Para permanecer 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

Pilar de bola

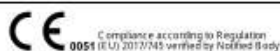

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
1 mm	-	23208610	23258610
2 mm	-	23208620	23258620
3 mm	-	23208630	23258630
4 mm	-	23208640	23258640
5,5 mm	-	23208650	23258655
Análogo	-	13205521	13205521
Retención	-	13208600	13208600

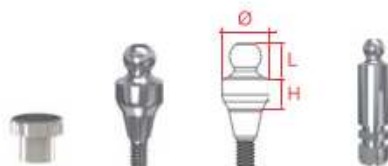

Pilar Over-Loc



ALTURA (H)	STD	MAXI
1 mm	23209681	23259681
2 mm	23209682	23259682
3 mm	23209683	23259683
4 mm	23209684	23259684
5 mm	23209685	23259685
Pilar Over-Loc sobre barra	13209589	13209589



Accesorios

Análogo (4 uds)	19008530
Poste de impresión (4 uds)	19008505
Pack de procesado (2 uds)	19008519
Pack de procesado Locator® para barra (2 uds)	190080282
Retención transparente (fuerte)	19008524
Retención rosa (ligera)	19008527
Retención azul (extraligera)	19008529

Retenciones para implantes angulados:

Retención verde (fuerte)	19008547
Retención rojo (ligera)	19008548



PILAR DE BOLA

- Material: Titanio grado V
- Para restauraciones implanto-retenidas
- Permiten una angulación máxima entre implantes de 10°
- Toma de impresión a nivel de implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye retención Ref. 13208600. Material VESTAKEEP® PEEK.

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,0 mm
- L: 3,0 mm

MAXI:

- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 4,0 mm
- L: 3,0 mm

Recomendaciones:

- Torque STD/MAXI 30 Ncm

PILAR OVER-LOC

- Material Titanio grado V con recubrimiento de nitruro de titanio
- Para restauraciones implanto-retenidas
- Permiten una angulación máxima entre implantes de 20°, y el de rango extendido de máximo 40°.
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Las retenciones se entregan en pack de 4 unidades
- Pilares Over-Loc: Fabricación Ticare
- Accesorios: Producto de distribución

STD:

- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,0 mm

MAXI:

- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 4,0 mm

Recomendaciones:

- Utilizar para su colocación el Locator® Core Tool junto con el destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Escoger la altura del pilar según la altura del margen gingival desde la plataforma del implante; así el pilar emergerá 1,5 mm por encima del margen
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm





Tornillos para postes, pilares y prótesis

INHEX MINI

REF.	DESCRIPCIÓN	L	A	D
~23235504	Tornillo poste impresión corto	16,4	10,45	3,4
~23235502	Tornillo poste impresión largo	22,4	17,15	2,1
~23235505	Tornillo de poste de impresión para encerado	28,3	23,05	2,1
*23232526	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm	8,6	2	2,1
*232310151	Tornillo retención pilar angulado 15°/20°	8,2	1,6	2,1
*13202528	Tornillo para prótesis pilar cónico 10°/30°	5,05	2,2	2,4
~23635502	Tornillo poste impresión largo TCP	22,4	14,15	2,1
*23632526	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm TCP	10,6	2	2,1

TCP

INHEX STD

REF.	DESCRIPCIÓN	L	A	D
~23205504	Tornillo poste impresión corto	16,98	9,73	4,1
~23205502	Tornillo poste impresión largo	21,01	14,64	2,4
~23205505	Tornillo de poste de impresión para encerado	27,01	20,64	2,4
*23202526	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm	8,4	2,3	2,4
*23202508	Tornillo retención con ranura	7,3	1,3	2,4
*232010151	Tornillo retención pilar angulado 15°/20°	7,7	1,5	2,4
*23201726	Tornillo retención pilar multiunit ang 17°/30°	7,03	1,9	2
*23282526	Tornillo retención para laboratorio (5 uds.)	8,4	2,3	2,4
*13202528	Tornillo para prótesis pilar conico 10°/30°	5,05	2,2	2,4
*13201727	Tornillo para prótesis pilar multiunit	4,55	2,45	2
*13201728	Tornillo perfil bajo para prótesis pilar multiunit	3,6	1,35	2
~23605502	Tornillo poste impresión largo TCP	21,01	11,14	2,4
*23602516	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm H2 TCP	9,4	2,3	2,4
*23602526	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm H3-H4 TCP	11,4	2,3	2,4
~23682516	Tornillo retención para laboratorio TCP H2 (5 uds)	9,4	2,3	2,4
~23682526	Tornillo retención para laboratorio TCP H3-H4 (5 uds)	11,4	2,3	2,4

TCP

INHEX MAXI

REF.	DESCRIPCIÓN	L	A	D
~23205004	Tornillo poste impresión corto	19,3	9,71	4,1
~23205002	Tornillo poste impresión largo	23,24	14,7	2,4
~23205005	Tornillo de poste de impresión para encerado	29,03	20,49	2,4
*23205025	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm	9,7	2,3	2,4
*23202509	Tornillo retención con ranura	8,6	1,2	2,4
*13202528	Tornillo para prótesis pilar conico 10°/30°	5,05	2,2	2,4
*232510151	Tornillo retención pilar angulado 15°/20°	9,66	1,5	2,4
*23251726	Tornillo retención para multiunit ang 17°/30°	7	0,4	2,3
*13201727	Tornillo para prótesis pilar multiunit	4,55	2,45	2
*13201728	Tornillo perfil bajo para prótesis pilar multiunit	3,6	1,35	2
*23285025	Tornillo retención para laboratorio (5 uds.)	9,7	2,3	2,4
*23205025	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm TCP	9,7	2,3	2,4

TCP


inHEX
PRÓTESIS



TORNILLOS


- Para tornillos Ticare BioCam puede consultar sus referencias en la pág. 27.

Rosca métrica:
- Mini: 1,4 mm
- STD: 1,6 mm
- MAXI: 2 mm

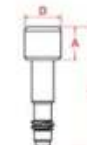



IN HEX MINI

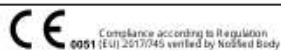

REF.	DESCRIPCIÓN	M	L	D
44301473	Tornillo para chimeneas anguladas	1,4 mm	7,3 mm	2 mm
44301490	Tornillo para chimeneas anguladas	1,4 mm	9 mm	2 mm
TCP 44301490	Tornillo para chimeneas anguladas TCP	1,4 mm	9 mm	2 mm
44302041	Tornillo para chimeneas ang. cónico 10° y 30°	2 mm	4,1 mm	2,3 mm



TORNILLOS ANGULAR INTERFASES

- Diseñados para poder ser insertados a través de la chimenea angulada realizada en el circonio.
- Poseen en su cabeza una conexión hexalobular para poder ser atornillados con un destornillador dinámico.

IN HEX STD



REF.	DESCRIPCIÓN	M	L	D
443010151	Tornillo para chimeneas anguladas	1,6 mm	7,2 mm	2,3 mm
44301679	Tornillo para chimeneas anguladas H2	1,6 mm	7,9 mm	2,3 mm
TCP 44301679	Tornillo para chimeneas anguladas TCP H2	1,6 mm	7,9 mm	2,3 mm
44301698	Tornillo para chimeneas anguladas H3-H4	1,6 mm	9,8 mm	2,3 mm
TCP 44301698	Tornillo para chimeneas anguladas TCP H3-H4	1,6 mm	9,8 mm	2,3 mm
44302041	Tornillo para chimeneas ang. cónico 10° y 30°	2 mm	4,1 mm	2,3 mm
44301440	Tornillo para chimeneas ang. Multiunit	1,4 mm	4 mm	2 mm



IN HEX MAXI



REF.	DESCRIPCIÓN	M	L	D
44302083	Tornillo para chimeneas anguladas	2 mm	8,3 mm	2,3 mm
TCP 44302083	Tornillo para chimeneas anguladas TCP	2 mm	8,3 mm	2,3 mm
44302098	Tornillo para chimeneas anguladas	2mm	9,8 mm	2,3 mm
TCP 44302098	Tornillo para chimeneas anguladas TCP	2mm	9,8 mm	2,3 mm
44302018	Tornillo para chimeneas anguladas	2mm	11,8mm	2,3 mm
TCP 44302018	Tornillo para chimeneas anguladas TCP	2mm	11,8mm	2,3 mm
44302041	Tornillo para chimeneas ang. cónico 10° y 30°	2 mm	4,1 mm	2,3 mm
44301440	Tornillo para chimeneas ang. Multiunit	1,4 mm	4 mm	2 mm






Correspondencia tornillos para angular interfases - interfases dinámicas

	REF. INTERFASE	CONEXIÓN	ALTURA GINGIVAL	TORNILLO	ANG. MAX.
	23237705	Inhex MINI Hexagonal	0,5mm	44301473	15°
	23237710		1mm	44301473	
	23237720		2mm	44301490	
	23237730		3mm	44301490	
	23237605	Inhex MINI Rotatorio	0,5mm	44301473	
	23237610		1mm	44301473	
	23237620		2mm	44301490	
	23237630		3mm	44301490	
	23637720	Inhex MINI Hexagonal TCP	2mm	44301490	
	23637730		3mm	44301490	
	23637620	Inhex MINI Rotatorio TCP	2mm	44301490	
	23637630		3mm	44301490	
	23207705	Inhex STD Hexagonal	0,5mm	443010151	20°
	23207710		1mm	44301679	
	23207720		2mm	44301679	
	23207730		3mm	44301698	
	23207605	Inhex STD Rotatorio	0,5mm	443010151	
	23207610		1mm	44301679	
	23207620		2mm	44301679	
	23207630		3mm	44301698	
	23607720	Inhex STD Hexagonal TCP	2mm	44301679	
	23607730		3mm	44301698	
	23607740		4mm	44301698	
	23607620	Inhex STD Rotatorio TCP	2mm	44301679	
	23607630		3mm	44301698	
	23607640		4mm	44301698	
	23257705	Inhex MAXI Hexagonal	0,5mm	44302083	20°
	23257710		1mm	44302098	
	23257720		2mm	44302098	
	23257730		3mm	44302018	
	23257605	Inhex MAXI Rotatorio	0,5mm	44302083	
	23257610		1mm	44302098	
	23257620		2mm	44302098	
	23257630		3mm	44302018	
	23657720	Inhex MAXI Hexagonal TCP	2mm	44302098	
	23657730		3mm	44302018	
	23657740		4mm	44302018	
	23657620	Inhex MAXI Rotatorio TCP	2mm	44302098	
	23657630		3mm	44302018	
	23657640		4mm	44302018	
	13237602	PC 10° Rot MINI	0,85mm	44302041	30°
	13207602	PC 10° Rot	0,4mm	44302041	
	13237652	PC 10° NoRot	0,4mm	44302041	
	13237653	PC 30° Rot	0,4mm	44302041	
	13237617	PC MUnit Rot	0,85mm	44301440	

Set de prostodoncia

154145073 Set de prostodoncia

REF.	DESCRIPCIÓN
15251125	Destornillador carraca ø 7 mm dia. hex. 1,25 l. 9 mm
15252125	Destornillador carraca ø 7 mm dia. hex. 1,25 l. 14 mm
15252525	Destornillador carraca ø 7 mm dia. hex. 1,25 l. 25 mm
15261125	Destornillador torque carraca ø 7 mm hexagonal l. 9 mm
15262125	Destornillador torque carraca ø 7 mm hexagonal l. 14 mm
15253125	Destornillador carraca ø 7 mm plano l. 14 mm
14658009	Extensor carraca ø 7 mm corto
14658016	Extensor carraca ø 7 mm largo
13801525	Destornillador para c/a hex. 1,25 l. 9 mm
13802525	Destornillador para c/a hex. 1,25 l. 14 mm
13861125	Destornillador torque para c/a hex. l. 9 mm
13862125	Destornillador torque para c/a hex. l. 14 mm
13863125	Destornillador para c/a plano l. 14 mm
23209021	Adaptador de c/a hex.
14658040	Llave de torque regulable ø 7 mm 10-40 Ncm
154040002	Caja Compact
154045072	Bandeja de prostodoncia

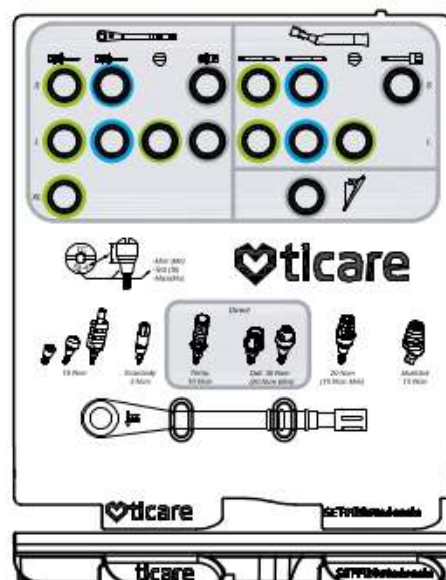

Todo el catálogo de productos está disponible en nuestra tienda online Genetic.



Escoge tu mejor opción

COMPACT
SURGICAL BOX



Compact Surgical Box Inhex + Quattro

15414534 Compact Surgical Box Inhex + Quattro

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
23209021	Adaptador para c/a	13102032	Perfiladora 3,3 mm Inhex
13802525	Destornillador c/a hex. largo 1,25 l. 14 mm	13102037	Perfiladora 3,75 mm Inhex
15252125	Destornillador hex. 1,25 mm manual 14 mm	13102042	Perfiladora 4,25 mm Inhex
23207001	Transportador largo 20 mm Inhex STD	13102049	Perfiladora 5,0 mm Inhex
13109034	Pin de paralelización MINI	139133326	Fresa huesos duros helicoidal RCD 3,2 mm
13109041	Pin de paralelización STD	139133356	Fresa huesos duros helicoidal RCD 3,5 mm
13109050	Pin de paralelización MAXI	139133406	Fresa huesos duros helicoidal RCD 4,0 mm
23257011	Remover largo Inhex MINI	139133496	Fresa huesos duros helicoidal RCD 4,9 mm
23257014	Remover largo Inhex STD	13114040	Fresa piloto RCD
14602000	Extensor de fresa 15 mm	13114033	Fresa perfiladora Quattro RCD 3,30 mm
132520206	Fresa inicial 2,00 RCD	13114037	Fresa perfiladora Quattro RCD 3,75 mm
139116206	Fresa 2,00 helicoidal RCD	13114042	Fresa perfiladora Quattro RCD 4,25 mm
139133306	Fresa helicoidal RCD 3,0 mm	14658010	Llave de carraca
139133336	Fresa helicoidal RCD 3,3 mm	14658009	Extensor carraca 7 mm
139133386	Fresa helicoidal RCD 3,8 mm	154045332	Bandeja Inhex + Quattro
139133436	Fresa helicoidal RCD 4,3 mm	154040002	Caja Compact
139133476	Fresa helicoidal RCD 4,7 mm		



Longitud de la fresa inicial: 13 mm

Longitud de las fresas helicoidales: 16 mm

Compact Surgical Box Inhex Osseous

154145053 Compact Surgical Box Inhex Osseous

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
23209021	Adaptador para c/a	139133386	Fresa helicoidal RCD 3,8 mm
13802525	Destornillador c/a hex. largo 1,25 l. 14 mm	139133436	Fresa helicoidal RCD 4,3 mm
15252125	Destornillador hex. 1,25 mm manual 14 mm	139133476	Fresa helicoidal RCD 4,7 mm
23207001	Transportador largo 20 mm Inhex STD	13102032	Perfiladora 3,25 mm Inhex
14607001	Transportador largo 20 mm Osseous STD	13102037	Perfiladora 3,75 mm Inhex
13109034	Pin de paralelización MINI	13102042	Perfiladora 4,25 mm Inhex
13109041	Pin de paralelización STD	13102049	Perfiladora 5,0 mm Inhex
13109050	Pin de paralelización MAXI	13102040	Avellanadora 3-4 mm Osseous
23257011	Remover largo Inhex STD	139133326	Fresa huesos duros helicoidal RCD 3,2 mm
23257014	Remover largo Inhex MINI	139133356	Fresa huesos duros helicoidal RCD 3,5 mm
14602000	Extensor de fresa 15 mm	139133406	Fresa huesos duros helicoidal RCD 4,0 mm
14658009	Extensor carraca 7mm corto	139133496	Fresa huesos duros helicoidal RCD 4,9 mm
132520206	Fresa inicial 2,00 RCD	14658010	Llave de carraca
139116206	Fresa 2,00 helicoidal RCD	154045032	Bandeja Osseous-Inhex
139133306	Fresa helicoidal RCD 3,0 mm	154040002	Caja Compact
139133336	Fresa helicoidal RCD 3,3 mm		



Longitud de la fresa inicial: 13 mm

Longitud de las fresas helicoidales: 16 mm

Compact Surgical Box Quattro

15414504 Compact Surgical Box Quattro

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
23209021	Adaptador para c/a	23257011	Remover largo Inhex MINI
15252125	Destornillador hex. 1,25 mm manual 14 mm	132520206	Fresa inicial 2,00 RCD
14658009	Extensor carraca 7 mm corto	139116206	Fresa 2,00 helicoidal RCD
14607001	Transportador largo 20 mm Osseous STD	13114040	Fresa piloto RCD
23207001	Transportador largo 20 mm Inhex STD	13114033	Fresa perfiladora Quattro RCD 3,30 mm
14602000	Extensor de fresa 15 mm	13114037	Fresa perfiladora Quattro RCD 3,75 mm
13109041	Pin de paralelización STD	13114042	Fresa perfiladora Quattro RCD 4,25 mm
23257004	Remover Inhex STD	139133306	Fresa helicoidal RCD 3,0 mm
14657004	Remover Osseous STD	139133336	Fresa helicoidal RCD 3,3 mm
13109003	Indicador de profundidad 1,7-2,5 mm Inh MINI	139133386	Fresa helicoidal RCD 3,8 mm
23257014	Remover largo Inhex STD	13102040	Avellanadora 3-4 mm Osseous
14657014	Remover largo Osseous STD	14658010	Llave de carraca



Longitud de la fresa inicial: 13 mm
Longitud de las fresas helicoidales: 16 mm

Compact Surgical Box Plus

154145053 Compact Surgical Box Plus

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
14607004	Transportador largo 20 mm Oss Mini c/t	139633336	Fresa 3,30 helicoidal larga L 21 mm RCD
14607009	Transportador largo 20 mm Oss Maxi c/t	139633386	Fresa 3,80 helicoidal larga L 21 mm RCD
23207004	Transportador largo 20 mm Inh MINI c/t	139633436	Fresa 4,30 helicoidal larga L 21 mm RCD
23207009	Transportador largo 20 mm Inh MAXI c/t	139633476	Fresa 4,70 helicoidal larga L 21 mm RCD
13861125	Destornillador torque para c/a hex L 9 mm	131073406	Terraja 3,30/3,40 Oss/Inh L 10 mm
13862125	Destornillador torque para c/a hex L 14 mm	131073756	Terraja 3,75 Oss/Inh L 10 mm
15251125	Destornillador carraca 7 mm hex. 1,25 L 8 mm	131074256	Terraja 4,25 Oss/Inh L 10 mm
13109004	Indicador de profundidad STD	131075006	Terraja 5,00 Oss/Inh L 10 mm
14658016	Extensor carraca 7 mm dia. corto	13109034	Pin paralelización Mini
14607100	Intercambiador de transportador	13103333	Perfiladora subcrestal prótesis 3,4/3,7
139521206	Fresa helicoidal 21x2 mm larga	13105050	Perfiladora subcrestal prótesis 4,1/4,5
132020206	Fresa inicial larga L 13 mm RCD	23209031	Adaptador de C/A hexagonal largo
139633306	Fresa 3 helicoidal larga L 21 mm RCD		



Longitud de las fresas largas: 21 mm

Set bandeja de topes de fresas

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
154040133 Set bandeja de topes de fresas					
Topes de fresas A		Topes de fresas B		Topes de fresas C	
*13973306	3,3-3,4 longitud 6 mm	*13973706	3,75-4,25 longitud 6 mm	*13975006	5,0 longitud 6 mm
*13973308	3,3-3,4 longitud 8 mm	*13973708	3,75-4,25 longitud 8 mm	*13975008	5,0 longitud 8 mm
*13973309	3,3-3,4 longitud 9 mm	*13973709	3,75-4,25 longitud 9 mm	*13975009	5,0 longitud 8 mm
*13973310	3,3-3,4 longitud 10 mm	*13973710	3,75-4,25 longitud 10 mm	*13975010	5,0 longitud 10 mm
*13973311	3,3-3,4 longitud 11,5 mm	*13973711	3,75-4,25 longitud 11,5 mm	*13975011	5,0 longitud 11,5 mm
*13973313	3,3-3,4 longitud 13 mm	*13973713	3,75-4,25 longitud 13 mm	*13975013	5,0 longitud 13 mm
*13973315	3,3-3,4 longitud 15 mm	*13973715	3,75-4,25 longitud 15 mm	*13975015	5,0 longitud 15 mm
*13973301	Clip 3,3-3,4	*13973701	Clip 3,75-4,25	*13975001	Clip 5,0


La bandeja también está disponible sin los topes (Ref. 154040132)

Set bandeja topes de fresa básicos

REF.	DESCRIPCIÓN
154040143 Set bandeja topes de fresa básicos	
*13973306	Tope fresa plataforma 3,3-3,4 L=6 mm
*13973308	Tope fresa plataforma 3,3-3,4 L=8 mm
*13973309	Tope fresa plataforma 3,3-3,4 L=9 mm
*13973310	Tope fresa plataforma 3,3-3,4 L=10 mm
*13973311	Tope fresa plataforma 3,3-3,4 L=11,5 mm
*13973301	Clip tope para fresas 3,3-3,4

Set bandeja expansores

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
154040123 Set bandeja expansores					
*132030462	Expansor 1	*1320304633	Expansor 3	*1320304643	Expansor 5
*132030463	Expansor 2	*1320304638	Expansor 4	*1320304647	Expansor 6

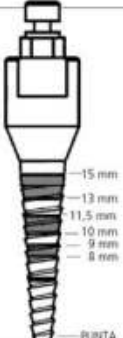	EXPANSOR N°1	EXPANSOR N°2	EXPANSOR N°3	EXPANSOR N°4	EXPANSOR N°5	EXPANSOR N°6
		15 mm: 3,0 mm 13 mm: 2,8 mm 11,5 mm: 2,65 mm 10 mm: 2,45 mm 9 mm: 2,3 mm 8 mm: 2,2 mm 6 mm: 2 mm - TIP: 1,4 mm	15 mm: 3,5 mm 13 mm: 3,3 mm 11,5 mm: 3,1 mm 10 mm: 2,9 mm 9 mm: 2,75 mm 8 mm: 2,6 mm 6 mm: 2,4 mm - TIP: 1,7 mm	15 mm: 4,1 mm 13 mm: 3,9 mm 11,5 mm: 3,6 mm 10 mm: 3,4 mm 9 mm: 3,25 mm 8 mm: 3,1 mm 6 mm: 2,85 mm - TIP: 2,1 mm	15 mm: 4,5 mm 13 mm: 4,2 mm 11,5 mm: 4,0 mm 10 mm: 3,8 mm 9 mm: 3,6 mm 8 mm: 3,4 mm 6 mm: 3 mm - TIP: 2,4 mm	15 mm: 4,9 mm 13 mm: 4,6 mm 11,5 mm: 4,3 mm 10 mm: 4,1 mm 9 mm: 3,9 mm 8 mm: 3,8 mm 6 mm: 3,5 mm - TIP: 2,7 mm
		Para implantes 3,30 y 3,40	Para implantes 3,75	Para implantes 4,25		Para implantes 5,0




Fresero

REF.	DESCRIPCIÓN
154040152	Fresero



Fresas iniciales

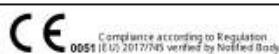

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
132520206	Fresa inicial corta RCD	2,0 mm	13 mm
132020206	Fresa inicial larga RCD	2,0 mm	13 mm
139116206	Fresa helicoidal 2,0 mm RCD	2,0 mm	16 mm
139521206	Fresa larga helicoidal 2,0 mm RCD	2,0 mm	21 mm



FRESAS INICIALES

- Material: Acero inoxidable con recubrimiento de carbono diamantado
- Marcas de profundidad fresa inicial: 6-8-9 mm
- Marcas de profundidad fresa 2,0 mm: 6-8-9-10-11,5-13-15 mm

Recomendaciones:

- Fresas RCD: Reemplazar después de 40 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones
- Esterilizar solo aquellas fresas que se vayan a utilizar

Fresas helicoidales RCD



REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
139133306	Fresa helicoidal 3,0 mm RCD	3,0 mm	16 mm
139133336	Fresa helicoidal 3,3 mm RCD	3,3 mm	16 mm
139133386	Fresa helicoidal 3,8 mm RCD	3,8 mm	16 mm
139133436	Fresa helicoidal 4,3 mm RCD	4,3 mm	16 mm
139133476	Fresa helicoidal 4,7 mm RCD	4,7 mm	16 mm



FRESAS HELICOIDALES RCD

- Material: Acero inoxidable con recubrimiento de carbono diamantado
- Fresas para hueso estándar: un anillo de color indicativo del diámetro del implante
- Marcas de profundidad fresas cortas: 6-8-9-10-11,5-13 y 15 mm
- Marcas de profundidad fresa largas: 6-8-9-10-11,5-13-15-18-20 mm

Recomendaciones:

- Reemplazar después de 40 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones
- Esterilizar solo aquellas fresas que se vayan a utilizar

Fresas helicoidales largas RCD



REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
139633306	Fresa helicoidal larga 3,0 mm RCD	3,0 mm	21 mm
139633336	Fresa helicoidal larga 3,3 mm RCD	3,3 mm	21 mm
139633386	Fresa helicoidal larga 3,8 mm RCD	3,8 mm	21 mm
139633436	Fresa helicoidal larga 4,3 mm RCD	4,3 mm	21 mm
139633476	Fresa helicoidal larga 4,7 mm RCD	4,7 mm	21 mm



Fresas helicoidales RCD hueso denso



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
139133326	Fresa helicoidal 3,2 mm RCD	3,2 mm	16 mm
139133356	Fresa helicoidal 3,5 mm RCD	3,5 mm	16 mm
139133406	Fresa helicoidal 4,0 mm RCD	4,0 mm	16 mm
139133496	Fresa helicoidal 4,9 mm RCD	4,9 mm	16 mm



FRESAS HELICOIDALES RCD

- Material: Acero inoxidable con recubrimiento de carbono diamantado
- Fresas para hueso estándar: un anillo de color indicativo del diámetro del implante
- Fresas para hueso denso: dos anillos de color indicativos del diámetro del implante
- Marcas de profundidad 6-8-9-10-11,5-13 y 15 mm

Recomendaciones:

- Reemplazar después de 40 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones

Fresas perfiladoras



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
13102032	Perfiladora 3,3 mm Inhex 3,25	3,25 mm	16 mm
13102037	Perfiladora 3,75 mm Inhex 3,6	3,6 mm	16 mm
13102042	Perfiladora 4,25 mm Inhex 4,1	4,1 mm	16 mm
13102049	Perfiladora 5,0 mm Inhex 4,9	4,85 mm	16 mm



FRESAS PERFILADORAS

- Material: Acero inoxidable
- Anillo de color indicativo del diámetro del implante
- Incluyen marcas de profundidad en el vástago para realizar perfilados subcrestales.

Recomendaciones:

- Remplazar después de 20 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones

Fresas perfiladoras Quattro RCD



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
13114033	Perfiladora 3,3 mm Quattro RCD	3,3 mm	16 mm
13114037	Perfiladora 3,75 mm Quattro RCD	3,7 mm	16 mm
13114042	Perfiladora 4,25 mm Quattro RCD	4,2 mm	16 mm
13114040	Fresa piloto 3,00 mm Quattro RCD	2,8 mm	



FRESAS PERFILADORAS QUATTRO RCD

- Material: Acero inoxidable con recubrimiento de carbono diamantado
- Anillo de color indicativo del diámetro del implante
- Marcas de profundidad: 1,6-8-9-10-11,5-13-15 mm

Recomendaciones:

- Remplazar después de 40 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones

Terrajas



Compliance according to Regulation
0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
131073406	Terraja 3,3/3,4 mm	3,3 mm	16 mm
131073756	Terraja 3,75 mm	3,75 mm	16 mm
131074256	Terraja 4,25 mm	4,25 mm	16 mm
131075006	Terraja 5,0 mm	5 mm	16 mm
131075406	Terraja MAXI PS	5 mm	16 mm



TERRAJAS


- Material: Acero inoxidable
- Marcas de profundidad: 6-8-9-10-11,5-13-15 mm

Recomendaciones:

- Utilizar de forma manual con el extensor de carraca y la llave de carraca
- Utilizar con el contra-ángulo junto con el adaptador de contra-ángulo
- Velocidad recomendada: 15 rpm

Fresa crestal

REF.	DESCRIPCIÓN
13102150	Fresa perfiladora hueso crestal

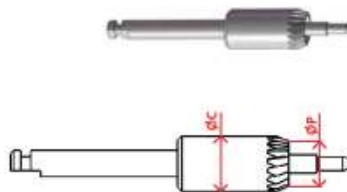

FRESA CRESTAL


- Material: Acero inoxidable
- Para eliminar hueso presente en la plataforma del implante y en su zona circundante
- Para implantes Inhex STD y Osseous STD y MAXI P5
- Diámetro de la plataforma: 4,1 mm
- Diámetro del cuerpo 5 mm
- Presenta un fiador para un correcto guiado de la fresa
- Producto de distribución

Recomendaciones:

- Velocidad de fresado: 150-300 rpm
- Utilizar en implantes de 3,75 y 4,25

Fresa subcrestal

REF.	DESCRIPCIÓN
13103333	Perfiladora subcrestal prótesis 3,4/3,7
13105050	Perfiladora subcrestal prótesis 4,1/4,5

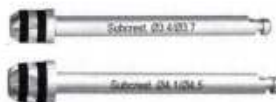

FRESA SUBCRESTAL

- Material: Acero inoxidable
- Para fresado subcrestal para prótesis de emergencia clásica y plataforma 4,1 mm
- Producto de distribución

Recomendaciones:

- Velocidad fresado: 150-300 rpm

Fresas de bola

	REF.	Ø	Nº DE HOJAS
[C/A]	13714127	2,7 mm	8
	13714140	4 mm	10
[P. de mano]	137141230	2,3 mm	8
	137141270	2,7 mm	8
	137141350	3,5 mm	8



FRESAS DE BOLA

- Material: Carburo de tungsteno
- Producto de distribución

Transportadores de implantes largos



Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF. DESCRIPCIÓN

23207004 Transportador largo Inhex MINI

23207001 Transportador largo Inhex STD

23207009 Transportador largo Inhex MAXI



TRANSPORTADORES

- Material: Titanio grado V
- Para sustituir el transportador premontado en situaciones de compromiso de espacio
- Marcas milimétricas para cirugía transgingival
- Marca más gruesa cada 3 milímetros para facilitar la lectura

Recomendaciones:

- Utilizar junto con el Intercambiador de transportador

Intercambiador de transportador



Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF. DESCRIPCIÓN

14607100 Intercambiador de transportador



INTERCAMBIADOR

- Material: Acero inoxidable
- Para cambiar el transportador premontado por el transportador largo cuando se prevea una limitación de espacio

Llaves quirúrgicas

REF. DESCRIPCIÓN

14658010 Llave de carraca

14658070 Llave de carraca dinamométrica 70 Ncm desmontable

14658250 Llave de carraca desmontable dinamométrica 250 Ncm



LLAVES

- Material: Acero inoxidable
- Producto de distribución

Llave de carraca:

- Para la colocación manual del implante o para su nivelado final
- Para pauta de expansión quirúrgica mediante expansores roscados

Recomendaciones:

- Utilizar junto con el extensor de carraca

Llave de carraca dinamométrica

- Para asegurar el torque de inserción del implante

Recomendaciones:

- Utilizar junto con el extensor de carraca

Extensores de carraca



Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF. DESCRIPCIÓN

14658009 Extensor carraca corto

14658016 Extensor carraca largo

14659021 Adaptador de llave de carraca dinamométrica Hexagonal



EXTENSORES

Extensor de carraca

- Longitud (A): 9 mm - Longitud (B): 16 mm
- Utilizar junto con la carraca para la nivelación final del implante
- Utilizar manualmente para la colocación manual del implante
- Para sujetar el transportador al desatornillarlo en casos de poca estabilidad primaria
- Héxagono en la base indicador de la posición del hexágono del implante
- Utilizar también para dar torque a la gama multiunit recto

Multiconversor



Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF. DESCRIPCIÓN


18089021 Multiconversor



MULTICONVERSOR

- Material: Acero inoxidable
- Para convertir puntas de destornillador para C/A en manuales o para usar con llave dinamométrica
- Para utilizar los bisturíes para C/A de forma manual

Extensor de fresas

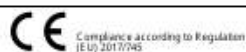

REF.	DESCRIPCIÓN
14602000	Extensor de fresas



EXTENSOR DE FRESAS

- Material: Acero inoxidable
- Para situaciones de compromiso de espacio
- No utilizar junto a la ref. 23209021 Adaptador transportador a contra-ángulo

Adaptador de transportador a contra-ángulo



REF.	DESCRIPCIÓN
23209021	Adaptador transportador a contra-ángulo



23209031	Adaptador de contra-ángulo largo
----------	----------------------------------




ADAPTADOR DE TRANSPORTADOR A CONTRA-ÁNGULO

- Material: Acero inoxidable
- Para la colocación de implantes mediante contra-ángulo
- Para dar torque a la gama multiunit recto
- El hexágono indica la posición del hexágono del implante

- **23209021:** Ø=5 mm; A=6,35 mm; L=21,35 mm
- **23209031:** Ø=5 mm; A=9,90 mm; L=34,35 mm

Indicador de profundidad

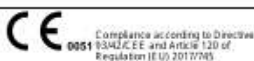


Ø	MINI	STD	MAXI
1,7 - 2,5 mm	13109003	-	-
1,8 - 3,2 mm	-	13109004	-
2,2 - 4,1 mm	-	-	13109005
2,0 mm	131090096	Angulado	



INDICADOR DE PROFUNDIDAD

- Material: Acero inoxidable
- Marcas de profundidad: 6-8-9-10-11,5-13-15 mm
- El indicador MINI puede utilizarse para cualquier diámetro de implante y después de cada una de las fresas

Pin paralelización

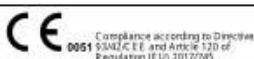


MINI	STD	MAXI
13109034	13109041	13109050



PIN PARALELIZACIÓN

- Material: Titanio grado V
- Para asegurar el paralelismo entre varios implantes, verificar el eje axial del implante y para saber el espacio que ocupará la plataforma del implante
- Diámetro parte central (Ø):
MINI - 3,4 mm
STD - 4,1 mm
MAXI - 5,0 mm

Remover

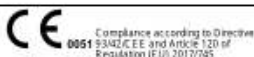

	MINI	STD	MAXI
Corto	23257001	23257004	23257009
Largo	23257011	23257014	23257019



REMOVER

- Material: Acero inoxidable
- Para trabajar directo al implante en aquellas situaciones en que no se desee o no sea posible utilizar el transportador premontado del implante.
- Remover corto: L= 15 mm; A=8 mm
- Remover largo: L=23 mm; A=16 mm



REF. DESCRIPCIÓN

154145063 Set Fidelis Inhex



REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
21802000	Fresa piloto TC Fidelis	21803810	Fresa 3.8x10 mm Fidelis
21002008	Fresa 2.0x10 mm Fidelis	21803811	Fresa 3.8x11,5 mm Fidelis
21002011	Fresa 2.0x11,5 mm Fidelis	21803813	Fresa 3.8x13 mm Fidelis
21002020	Fresa 2.0x13 mm Fidelis	21007002	Transportador Inhex Fidelis
21803008	Fresa 3.0x8 mm Fidelis	14607100	Intercambiador de transportador
21803010	Fresa 3.0x10 mm Fidelis	21001090	Pin Fix Fidelis
21803011	Fresa 3.0x11,5 mm Fidelis	21803006	Fresa injerto en bloque L6 mm
21803013	Fresa 3.0x13 mm Fidelis	14658009	Extensor carraca Ø7 mm corto
21803308	Fresa 3.3x8 mm Fidelis	15252125	Destornillador carraca 7 mm dia. hex. 1,25 l. 14 mm
21803310	Fresa 3.3x10 mm Fidelis	23209021	Adaptador de contraángulo hexagonal
21803311	Fresa 3.3x11,5 mm Fidelis	13802525	Destornillador para c/a hex. largo 1,25 l. 14 mm
21803313	Fresa 3.3x13 mm drill	21002040	Bisturí circular Ø 7 mm hex. 1,25 l. 14 mm
21804309	Fresa cresta Fidelis	154045062	Bandeja Fidelis
21803808	Fresa 3.8x8 mm Fidelis	154040002	Caja Compact



Adaptador de contra-ángulo



REF. DESCRIPCIÓN

23209021 Adaptador C/A



ADAPTADOR DE CONTRA-ÁNGULO

- Material: Acero inoxidable
- Para la colocación del implante con contra-ángulo a través de férula

Casquillo férula



REF. DESCRIPCIÓN

21004004 Casquillo férula (5 unidades)



CASQUILLO FÉRULA

- Material: Titanio grado V
- Para colocar en férula quirúrgica
- Permiten el fresado y la colocación guiada de los implantes

Fresa fijación y fix pin



REF. DESCRIPCIÓN

21803006 Fresa injerto en bloque L6 mm

21001090 Fix Pin



FRESA FIJACIÓN Y FIX PIN

- Material Acero inoxidable
- Para la fijación de la férula en su posición

Transportadores para cirugía guiada



REF. DESCRIPCIÓN LONGITUD

21007002 Transportador Inhex 9,0 mm



TRANSPORTADORES

- Material: Titanio grado V
- Para la instalación de los implantes a través de la férula
- Es necesario sustituir el transportador premontado del implante por el transportador de cirugía guiada

Fresas



REF. DESCRIPCIÓN

21804309 Fresa cresal Fidelis

21802000 Fresa piloto TC Fidelis

21002008 Fresa 2.0x10 mm Fidelis

21002011 Fresa 2.0x11,5 mm Fidelis

21002020 Fresa 2.0x13 mm Fidelis

21803008 Fresa 3.0x8 mm Fidelis

21803010 Fresa 3.0x10 mm Fidelis

21803011 Fresa 3.0x11,5 mm Fidelis

21803013 Fresa 3.0x13 mm Fidelis

21803308 Fresa 3.3x8 mm Fidelis

21803310 Fresa 3.3x10 mm Fidelis

21803311 Fresa 3.3x11,5 mm Fidelis

21803313 Fresa 3.3x13 mm Fidelis

21803808 Fresa 3.8x8 mm Fidelis

21803810 Fresa 3.8x10 mm Fidelis

21803811 Fresa 3.8x11,5 mm Fidelis

21803813 Fresa 3.8x13 mm Fidelis



FRESAS

- Material: Acero inoxidable con recubrimiento de carbono diamantado
- Para implantes de 8 a 13 mm de longitud

Recomendaciones:

- Reemplazar después de 40 fresados de lecho de implantes y sus correspondientes esterilizaciones

Set Fidelis Plus

154145083 Set Fidelis Plus

REF.	DESCRIPCIÓN
23804033	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 3,3
23804037	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 3,75
23804042	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 4,25
21803208	Fresa 3.2x8 mm TC Fidelis
21803508	Fresa 3.5x8 mm TC Fidelis
21804008	Fresa 4.0x8 mm TC Fidelis
21803210	Fresa 3.2x10 mm TC Fidelis
21803510	Fresa 3.5x10 mm TC Fidelis
21804010	Fresa 4.0x10 mm TC Fidelis
21803211	Fresa 3.2x11.5 mm TC Fidelis
21803511	Fresa 3.5x11.5 mm TC Fidelis
21804011	Fresa 4.0x11.5 mm TC Fidelis
21803213	Fresa 3.2x13 mm TC Fidelis
21803513	Fresa 3.5x13 mm TC Fidelis
21804013	Fresa 4.0x13 mm TC Fidelis
154040002	Compact Surgical Container Box
154045082	Bandeja Fidelis Plus



Este set es un complemento al Set Fidelis. Incorpora Fresas Perfiladoras Quattro y Fresas para Huesos Duros.

Fresas y perfiladoras Fidelis Plus



REF.	DESCRIPCIÓN
23804033	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 3,3
23804037	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 3,75
23804042	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 4,25
21803208	Fresa 3.2x8 mm TC Fidelis
21803508	Fresa 3.5x8 mm TC Fidelis
21804008	Fresa 4.0x8 mm TC Fidelis
21803210	Fresa 3.2x10 mm TC Fidelis
21803510	Fresa 3.5x10 mm TC Fidelis
21804010	Fresa 4.0x10 mm TC Fidelis
21803211	Fresa 3.2x11.5 mm TC Fidelis
21803511	Fresa 3.5x11.5 mm TC Fidelis
21804011	Fresa 4.0x11.5 mm TC Fidelis
21803213	Fresa 3.2x13 mm TC Fidelis
21803513	Fresa 3.5x13 mm TC Fidelis
21804013	Fresa 4.0x13 mm TC Fidelis



FRESAS Y PERFILADORAS

- Material: Acero inoxidable
- Para implantes de 8 a 13 mm de longitud

Recomendaciones:

- Reemplazar después de 40 fresas de lecho de implante/usos y sus correspondientes esterilizaciones
- Las fresas Perfiladoras Quattro se recomiendan en hueso tipo III y IV.
- Las fresas para huesos duros permiten expandir la funcionalidad de la cirugía guiada hasta huesos de tipo I.



SET-EXplantación

atraumática y extracción de tornillos rotos



Set universal

Plantillas compatibles con otras marcas



154145043 Set de Explantación

REF.	DESCRIPCIÓN
23257011	Remover largo Inhex Mini
23257014	Remover largo Inhex Std
23257019	Remover largo Inhex Maxi
14657011	Remover largo Osseous Mini
14657014	Remover largo Osseous Std
14657019	Remover largo Osseous Maxi
14412335	Tornillo de explantación Inhex Mini
14412375	Tornillo de explantación Inhex Std
14412355	Tornillo de explantación Inhex Maxi
14411375	Tornillo de explantación Osseous Mini-Osseous Std
14411505	Tornillo de explantación Osseous Maxi
14412330	Llave de explantación Inhex Mini
14412370	Llave de explantación Inhex Std 3,75
14412420	Llave de explantación Inhex Std 4,25
14412500	Llave de explantación Inhex Maxi 5
14411330	Llave de explantación Osseous Mini
14411370	Llave de explantación Osseous Std

REF.	DESCRIPCIÓN
14411500	Llave de explantación Osseous Maxi
15252125	Destornillador carraca Ø7mm hexagonal 1,25 L14 mm
14658009	Extensor carraca Ø7mm corto
14419130	Llave de apriete de tornillo de explantación
14419032	Llave de contra-rosca Osseous Maxi-Inhex Mini
14419033	Llave de contra-rosca Inhex Std
14419031	Llave de contra-rosca Osseous Mini/Std -Inhex Maxi
14401416	Escariador extracción torn. fracturados Inhex Mini
14401417	Escariador extracción torn. fract. Oss Mini/Std Inhex Std
14401418	Escariador extracción torn. fract. Oss Maxi-Inhex Maxi
18089021	Multiconversor
14419050	Llave extracción tornillos con hexágono redondeado
14419041	Llave extracción prótesis fracturada InHex Mini/Std
14419042	Llave extracción prótesis fracturada InHex Maxi
14658250	Llave carraca desmontable dinamométrica 250 Ncm
154045042	Bandeja Set de Explantación
154040002	Caja Compact

ANEXO

Guía de torques

		MINI	STD	MAXI
Tornillos de cierre		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Tornillos de cicatrización		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Postes de impresión		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Scanbodies		3 Ncm	3 Ncm	3 Ncm
Pilares personalizados		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Pilares definitivos directos a implante		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Prótesis sobre pilar cónico 10° o 30°		15 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Prótesis sobre pilares de 20° multiunit rectos o angulados			15 Ncm	15 Ncm
Prótesis provisional		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Tornillos para chimeneas anguladas		Utilizar el torque recomendado por cada fabricante para el caso equivalente de chimeneas rectas.		

ANEXO

Marcas de fresa y perfiladora



**ENTRÉGALE SU
IMPLANT CARD**

A

El DNI de su implante



ID Number
Código único Genetic
para cada implante

**TRANSMITE A TU PACIENTE LA
CALIDAD DEL SISTEMA TICARE**

**DESCARGA SU
CERTIFICADO**

B

Certificado
individualizado de fabricación
y verificación accesible para
la clínica y el paciente

El certificado se
descarga vía web

Certificado de prótesis disponible al
vincular en Genetic con el ID Number



Condiciones Generales*

Realización de pedidos

- Teléfono de pedidos:
Desde España: 983 309 602
- Teléfono internacional: +34 983 211 312
- E-mail: atencionalcliente@ticareimplants.com
- Catálogo on-line: www.ticareimplants.com

Realización de pedidos

A todos los pedidos inferiores a 325 €, se les incluirá gastos de envío o irán a portes debidos.
En los pedidos realizados por genetic.ticareimplants.com los portes son gratuitos.

Comprobación de pedidos

Una vez recibido su pedido, compruebe que es correcto y se halla en buen estado.
Si no fuera así, póngase en contacto con nosotros lo antes posible para reponer el material que sea necesario. En caso contrario, no nos hacemos responsables del mismo.

Cambios y Devoluciones

No se admitirán cambios ni devoluciones transcurridos 75 días desde la fecha de emisión del albarán o cuando el material haya sido abierto o utilizado o su embalaje no se encuentre en perfectas condiciones.

Garantía

Consulte condiciones en www.ticareimplants.com

*Condiciones aplicables solo en España. Consultar para otros países.

MOZO-GRAU S.A. se reserva el derecho de modificar las presentes condiciones.

 Ticare es una marca registrada de MOZO-GRAU S.A.

RETRATAMIENTOS

ZERO

NO DEJES QUE LA PERIIMPLANTITIS
REDUZCA TUS BENEFICIOS



incidencia
periimplantitis
en paciente



sobrecoste
de materiales

Coste
oportunidad:



hora de
tratamiento

Coste hora/sillón periimplantitis: **600€**



pérdida de
beneficio

Disminución satisfacción paciente =
menos ★★★★★☆ valoración a la clínica



39,5%
pacientes presentan
complicaciones en el
seguimiento a 10 años.



citas adicionales por aflojamientos de tornillos



Descarga el
informe aquí.

GAP **ZERO**
TECHNOLOGY

♥ **ticare**

in HEX

SOLO TICARE ES GAPZERO®

Reduce los micromovimientos

GAP ZERO
TECHNOLOGY
ticare

Disminuye el riesgo de periimplantitis

Espira de doble rosca
Reduce tiempo de inserción y calentamiento óseo

Superficie RBM-TC
Para mayor contacto hueso-implante

Estabilidad primaria y secundaria
Y facilidad de inserción gracias a su forma anatómica

Ápice más eficaz
Cono más apuntado que aporta estabilidad primaria adicional

 **ticare**

Tu futuro profesional empieza aquí ¿Te unes?

NextGen
by  **ticare** 



**En Ticare llevamos más de 30 años cuidando la salud
periimplantaria y comprometidos con la ciencia, la
investigación y la innovación.**

Desarrollamos soluciones que garantizan la máxima
seguridad y confianza en cada tratamiento.



Colaboraciones:





España

Teléfono: 983 309 602

Email: info@ticareimplants.com

MOZGRAU S.A.

C/ Santiago López González, 7 · 47197 · Valladolid, España

www.ticareimplants.com